



PC-15/151

Sedia a rotelle
manuale in acciaio

MANUALE D'USO

Ref. SACPC15



più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose.

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso della nuova sedia a rotelle manuale in acciaio **PC-15/151**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 – Parti	4
2 – Descrizione	4
3 – Caratteristiche tecniche	5
4 – Montaggio e utilizzo	7
5 – Manutenzione e pulizia	9
6 – Informazioni	9
7 – Garanzia	10

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

PC-15/151 CARROZZINA PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

La carrozzina in acciaio PC-15/151 possiede uno schienale reclinabile a 180° e permette anche di regolare le pedane, offrendo così il massimo comfort per riposare e conservare una corretta posizione del corpo.

È ideale per essere utilizzata all'esterno, data la sua stabilità, che consente all'utilizzatore di spingersi e superare i bordi o marciapiedi senza difficoltà.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



PC-15



PC-151

INFORMAZIONI GENERALI

Misure	PC-15	PC-151
Larghezza (Misura 40)	56 cm	66 cm
Larghezza (Misura 42)	58 cm	68 cm
Larghezza (Misura 45)	61 cm	71 cm
Profondità (min-max)	120,5 - 125 cm	122,5 - 126 cm
Profondità senza poggiatesta	82 cm	86 cm
Altezza	125 cm	125 cm
Larghezza ripiegata	15 cm	15 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	49 cm	49 cm

Peso	PC-15	PC-151
Peso total	22,50 kg	24,70 kg
Peso senza poggiatesta	19,20 kg	21,40 kg
Portata massima massima	120 kg	120 kg

Materiale Acciaio

Colore Blu

CARATTERISTICHE TECNICHE

Seduta

Larghezza (3 dimensioni)	38/42/45 cm
Profondità del sedile	40 cm
Tipologiapò	Permanente
Materiale	Tessuto ignifugo

Bracciali

Larghezza	5 cm
Lunghezza	26 cm
Tipologia	Fisso

Pedane

Profondità (min-max)	36,5 - 40 cm
Peso	3,3 kg
Tipologia	Elevabile e smontabile

Schienale

Larghezza (Misura 38)	38 cm
Larghezza (Misura 42)	42 cm
Larghezza (Misura 45)	45 cm
Altezza schienale con poggiatesta	125 cm
Altezza schienale senza poggiatesta	100 cm
Tipologia	Pieghevole a 180°
Materiale	Tessuto ignifugo


Ruote	PC-15	PC-151
Diametro ruota anteriore	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Diametro ruota posteriore	Ø 31,5 cm	Ø 60 cm
Colore ruote anteriori	Preto	Preto
Colore ruote posteriori	Preto	Preto
Tipologia	Sólido/Inflável	Sólido/Inflável

Outras características

Tipo de travão	Bloqueio do travão
Tipo de dobragem	Cruzeta única com 4 estabilizadores
Apoio de cabeça	Sim, amovíveis



Apoios de pés eleváveis

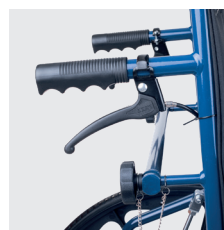

Reclinação do encosto



Cadeira dobrável

4. USO E MONTAGGIO

4.1. UTILIZZO DELLA DISTRIBUZIONE

Posizionare la carrozzina su un fianco. Per aprire la carrozzina, mettere le mani su entrambi i lati dei tubi posizionati sotto il tessuto del sedile e premere verso il basso per aprire la carrozzina. Una volta aperta, posizionare il tubo dietro lo schienale sul retro della carrozzina.



4.2. USO DI PIEGHEVOLI

Per prima cosa rimuovere il tubo d'acciaio dietro lo schienale. Per piegare la sedia, i poggiatesta devono essere ripiegati. È necessario afferrare dal centro del sedile a entrambe le estremità e tirare verso l'alto; se si usa troppa forza, si rischia di sollevare la sedia.



4.3. USO DELLO SCHIENALE RECLINABILE

Dietro lo schienale, sotto i polsini, si trova la reclinazione dello schienale; premere sulle mani per reclinare o meno lo schienale.



4.4. USO DEL POGGIAPIEDI PIEGHEVOLE

Tirare la leva in acciaio in avanti per ripiegare i poggiatesta; una volta raggiunta l'altezza desiderata, rilasciare la leva in modo che si blocchi in posizione. Per abbassare i poggiatesta, tirare la leva per riportarli nella posizione più bassa.



4.5. USO DEI FRENI

L'utente tiene i freni con le mani e, una volta che la carrozzina è ferma, li aziona in modo da bloccare completamente le ruote posteriori.



4.6. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLO SCHIENALE

È sufficiente rimuovere la parte superiore dello schienale. Per montarlo, assicurarsi che i fori dello schienale aderiscano perfettamente alla parte superiore.




4.7. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI BRACCIOLI

Estire del pequeño objeto de acero para extraer el reposabrazos completamente. Para colocarlo, vuelva a estirar, sabrá que su reposabrazos se ha colocado correctamente cuando escuche un "clic".



4.8. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI POGGIAPIEDI

Per rimuovere le pedane, è necessario spostare il sistema di attivazione e contemporaneamente sollevare la pedana. Per rimmetterlo in posizione, assicurarsi che scatti in posizione e farlo scivolare fuori, si dovrebbe sentire un "clic".

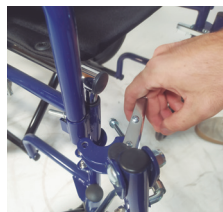

5. MANUTENZIONE

- Prima di utilizzare la carrozzina, controllare regolarmente che tutte le viti siano serrate e fissate. Se alcune viti sono allentate o mancanti, portare la carrozzina presso un centro di assistenza.
- Per un migliore funzionamento, è necessario aggiungere olio lubrificante alle parti mobili della carrozzina.
- Pulire la carrozzina con un panno morbido e asciutto.
- Mantenere puliti i rivestimenti del sedile e dello schienale per proteggere la pelle dell'utente.

6. AVVISO

⚠ La carrozzina non è certificata per i crash test e pertanto non può essere utilizzata per il trasporto in veicoli adattati.

- È consigliabile utilizzare la carrozzina su superfici piane, all'interno o all'esterno di una stanza; nei viaggi più lunghi è preferibile che ci sia sempre un accompagnatore che aiuti l'utente in caso di ostacoli.
- La carrozzina ha una portata massima di 120 kg.
- Per utilizzare la carrozzina senza problemi, la velocità dovrebbe essere compresa tra i 3 e i 5 km/h.
- I freni servono a sollevare o abbassare la carrozzina e a fermarla. Non usare i freni quando si è in movimento, soprattutto quando si sale o si scende da un pendio, perché si rischia di ribaltarsi.
- Gli utenti non devono stare in piedi sulle pedane, perché potrebbero ribaltare la carrozzina e cadere.
- Quando si utilizza la sedia a rotelle in pendenza, non inclinarla né girarla improvvisamente.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è protetto da questa garanzia, a causa del difetto di conformità del cliente che si manifesta entro un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore dovrà continuare a rivolgersi alla parte venditrice per ottenere la riparazione del difetto di conformità del bene, ma se necessario, l'utente dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso per motivi di fabbricazione e non per uso improprio o mancanza di manutenzione.

L'ambito territoriale della presente Garanzia si estende all'intero territorio nazionale spagnolo. La presente Garanzia non pregiudica i diritti riconosciuti al consumatore in conformità con le disposizioni del Regio Decreto Legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione Europea a difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER RENDERE EFFICACE LA GARANZIA

Affinché la Garanzia abbia effetto, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita in cui ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, sia perché chiuso, sia perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, è possibile contattare direttamente il produttore tramite e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o ricevuta d'acquisto, oppure una bolla di consegna successiva alla fattura o ricevuta, riportante chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore dovrà consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato,

accompagnandolo con una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente non rispettando le istruzioni indicate in questo manuale o causati da altri fattori umani, uso improprio, collisione con qualsiasi oggetto...
- Danni causati da incidenti, abusi, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non riporti o il cui numero di serie o di fabbrica sia alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti ad usura.
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, S.L..

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O CON PARTI MANCANTI.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

PC-151

La carrozzina in acciaio PC-15/151 è caratterizzata da uno schienale reclinabile a 180° e dalla possibilità di regolare i poggiatesta in altezza o di ripiegarli, offrendo il massimo comfort, riposo e una postura corretta.



PC-151

È ideale per l'uso all'aperto e offre una maggiore stabilità all'utilizzatore, che sarà in grado di spingersi e di superare i marciapiedi senza problemi.



Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme al MDR

Manuale d' uso

Sedia a rotelle manuale in acciaio, PC-15/151

V3 · 26/04/2022