



**Zoe**

Handbike

**MANUALE D'USO**

Ref. SCACZOE300H10N

più di 50 anni di vita senza limiti

**! Nota importante**

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, poiché possono presentare modifiche progettuali a seconda delle esigenze costruttive.

Il prodotto in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Consulta il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DA TOTALCARE EUROPE

# TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto **IM di TotalCare Europe**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo significa che i nostri prodotti offrono i migliori vantaggi, permettendoti di godere di più libertà ogni giorno e l'autonomia di cui hai bisogno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. Questo ti permetterà di familiarizzare con il tuo scooter **Zoe**, che ti consentirà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

## GUIDA RAPIDA.

È importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto

<b>1 – Parti della sedia.....</b>	<b>4</b>
<b>2 – Descrizione del prodotto.....</b>	<b>4</b>
<b>3 – Caratteristiche del prodotto .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – Istruzioni di sicurezza.....</b>	<b>6</b>
<b>5 – Diagrammi .....</b>	<b>7</b>
<b>6 – Uso e montaggio.....</b>	<b>8</b>
<b>7 – Ricarica delle batterie.....</b>	<b>9</b>
<b>8 – Norme di sicurezza .....</b>	<b>9</b>
<b>9 – Manutenzione e pulizia .....</b>	<b>10</b>
<b>10 – Recupero dopo l'incidente .....</b>	<b>10</b>
<b>11 – Garanzia.....</b>	<b>11</b>

## 1. PARTES DE LA PARTI DELLA SEDIA



## 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### POTENTE HANDBIKE CON SISTEMA EASY HITCH

L'handbike Zoe è un piccolo accessorio per la carrozzina manuale che garantisce libertà e velocità negli spostamenti all'aperto.

Ha un design e dimensioni che lo rendono facile da trasportare. È dotato di luce anteriore, clacson e display digitale che indica la distanza percorsa e la velocità.

La nuova handbike Zoe ha un ancoraggio migliorato che permette di fissare la Zoe alle sedie a rotelle manuali senza difficoltà. È regolabile in altezza.

Ha una batteria al litio da 10 Ah che garantisce un'autonomia dai 30 ai 35 km, con appena 7 o 8 ore di carica completa. Ha un motore da 36V 250W che arriva fino a 20 km/h.

### 3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



ZOE HANDBIKE

#### INFORMAZIONI GENERALI

##### Misure

Larghezza complessiva	18 - 61 cm
Profondità totale	74 cm
Altezza totale	81 - 91 cm

##### Peso

Peso totale	15 kg
Peso senza batterie	11,90 kg

<b>Materiale</b>	Alluminio	<b>Colore</b>	Nero
------------------	-----------	---------------	------

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### Motore

Motore	250 W
Batteria	10 Ah (litio)
Numero di batterie	1
Autonomia	30 - 35 km
Velocità massima	20 km/h
Caricatore esterno	2 Ah

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Ruota</b>	
Misure delle ruote	Ø 30 cm
Larghezza della ruota	5,5 cm
Tipo di ruota	gonfiabile
<b>Altre caratteristiche</b>	
Corno	Si
Luci anteriori	Si
Inversione	Si
Pieghevole	Si
Ruote antiribaltamento	Si
Tipo di freno	Disco



Zoe Anchor



Freni e velocità.

## 4. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La trazione elettrica della sedia a rotelle è un accessorio per sedia a rotelle manuale. Collegando questo motore elettrico, puoi trasformare la tua sedia a rotelle manuale in una sedia a rotelle elettrica. Una volta che sarai nell'area pubblica, verrai trattato come un trasporto/veicolo, quindi potrebbero esserci anche rischi per la sicurezza. (Una volta che lo guidi nell'area pubblica, avrà anche le proprietà di trasporto, quindi potrebbero esserci anche rischi per la sicurezza per tutti i modi di trasporto) Il rigoroso rispetto della "Legge sulla sicurezza stradale" proteggerà te e gli altri sulla strada nella massima misura possibile.


È necessario sapere quanto segue: Una volta che la trazione elettrica per sedia a rotelle viene guidata su strade pubbliche o altri luoghi pubblici, anche se è conforme alla "Legge sulla Sicurezza Stradale", potrebbero verificarsi anche situazioni pericolose dovute a guida non autorizzata o utilizzo errato. Quando si guida a velocità elettrica più veloce, lo spazio di frenata del veicolo aumenta di conseguenza. Su alcune strade scivolose o soggette a pioggia, la frenata di emergenza può causare lo slittamento della ruota, aumentando di conseguenza lo spazio di frenata. Quindi stai attento durante la guida e mantieni una velocità adeguata, mantenendo una distanza ragionevole e sicura da altri pedoni e veicoli può ridurre il rischio di guida.

Non saremo responsabili per alcuna responsabilità diretta o congiunta per qualsiasi proprietà, perdita personale, incidente, controversia legale e tutti gli altri eventi che risultano in un conflitto di interessi a seguito della violazione della "Legge sulla sicurezza stradale". Non prestare questo prodotto a una persona che non sa come usarlo in caso di infortuni. Sii responsabile della sicurezza dei tuoi amici. Prima di dare questo prodotto a un amico, assicurati di insegnargli l'uso di questo prodotto e le relative precauzioni.


Si prega di controllare il prodotto prima di ogni corsa. Se le parti evidenti sono allentate, la durata della batteria è inferiore, i pneumatici perdono o l'eccessiva usura della superficie, il suono anomalo durante la svolta, il guasto dei freni e altre circostanze anomale, interrompere immediatamente l'uso, non forzare la guida. Se si riscontra uno dei problemi sopra indicati, contattare il rivenditore locale per assistenza e manutenzione professionali.

## 5. DIAGRAMMI


### 5.1. SCHEMA DI COLLEGAMENTO

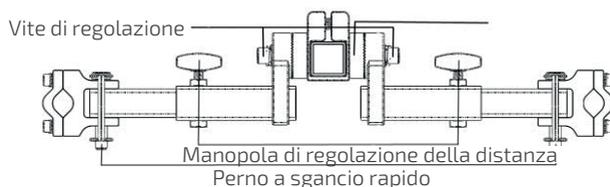

### 5.2. SCHEMA DEL MANUBRIO

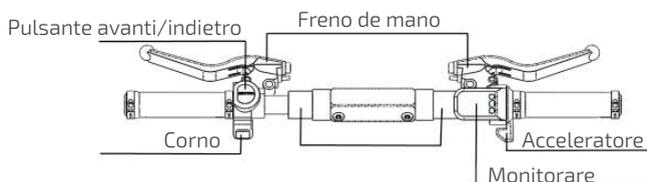

### 5.3. FUNZIONI CHIAVE

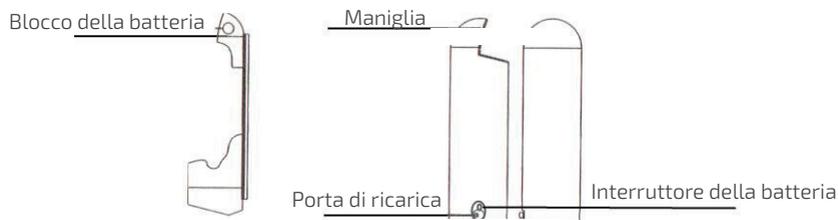

### 5.4. MONITORARE LE FUNZIONALITÀ




**Funzione pulsante:** il funzionamento dei pulsanti è suddiviso in pressione lunga e breve, ad esempio:

- Pressione prolungata = accensione; Pressione breve = accensione/spengimento fari (spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività).
- Pulsante di cambio velocità **ECO MID HIGH**.
- **M** Pressione breve = il monitor mostra ODO/TRIP/VOL.

## 6. UTILIZZO E MONTAGGIO


### 6.1. UTILIZZO DEL MANUBRIO PIEGHEVOLE

Piegare la maniglia verso l'interno, chiudere il pulsante centrale del manubrio e sentire un "clic".

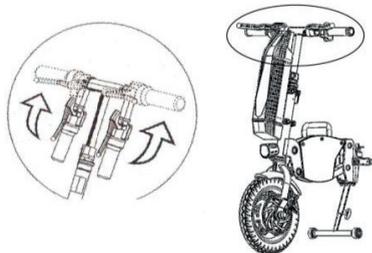


### 6.2. UTILIZZO DELL'ALTEZZA DEL MANUBRIO

Mettere la maniglia in una posizione adatta. Quindi stringere la chiave di regolazione e fissarla successivamente.

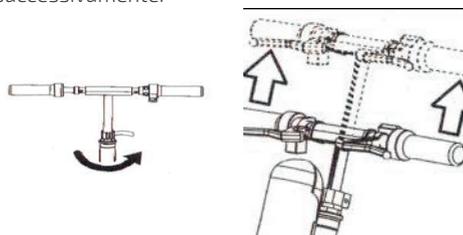

### 6.3. ASSEMBLAGGIO DEL CORPO


Il supporto deve essere inserito nel foro come mostrato in figura fino a sentire un "click".

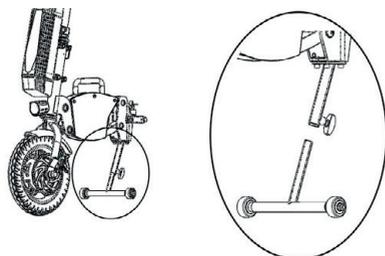

### 6.4. ASSEMBLAGGIO DELL'ANCORA


Fissare l'ancoraggio al telaio inferiore della sedia a rotelle a rotelle.

Utilizzare la manopola della distanza per regolare la posizione appropriata, quindi inserire il blocco.

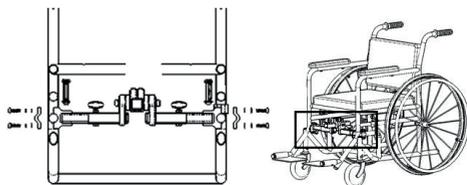


### 6.5. COLLEGARE L'AZIONAMENTO ELETTRICO


Sollevare l'azionamento elettrico allo stesso livello della porta di collegamento e quindi installarlo.

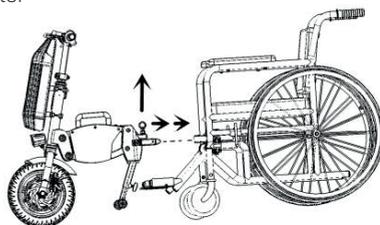

Tenere premuto il pulsante rosso per sollevare le ruote anteriori della sedia a rotelle ad un'altezza adeguata da terra. Il pulsante verde si abbassa e solleva il perno di bloccaggio per uscire dalla connessione.

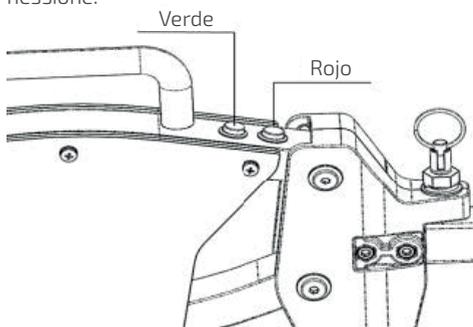

## 7. RICARICA DELLA BATTERIA

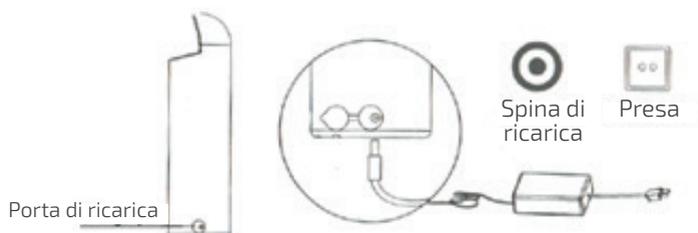

## 8. REGOLAMENTO DI SICUREZZA

- Quando si utilizza il prodotto, prestare attenzione alla presenza di persone o cose nelle vicinanze per evitare collisioni.
- Utilizzare questo prodotto come indicato. In pendenza, in pendenza o su ostacoli sulla strada, prestare attenzione all'impatto del trasferimento del baricentro.
- Quando si attraversa un cancello o un ponte, assicurarsi che la distanza tra i due lati sia sufficiente, in modo che il veicolo non si scontri durante la guida.
- Si prega di non sovraccaricare il veicolo, il fornitore non è responsabile per danni causati da sovraccarico, urti o altro uso improprio.
- Quando attraversi i gradini, chiedi aiuto agli altri. Si prega di rispettare le regole del traffico quando si utilizza il veicolo su strada.
- Si prega di non bere alcolici e di non guidare sotto l'effetto di droghe.
- Presta attenzione al meteo e al traffico quando esci.
- Non salire le colline all'indietro.
- Si prega di ridurre la velocità durante la svolta. Quando si guida con trazione elettrica, sostenere la struttura.
- Quando si guida al buio, provare a indossare indumenti leggeri o riflettenti e assicurarsi che il sedile abbia strisce riflettenti su entrambi i lati e sul retro.
- Prestare attenzione e assicurarsi che le strisce riflettenti siano pulite e non coperte da nulla.
- Questo prodotto è solo per una persona.
- Quando il prodotto viene parcheggiato all'aperto per un lungo periodo, prestare attenzione e coprirlo con un panno per evitare l'umidità.
- In condizioni molto umide e molto fredde, la funzionalità della trazione elettrica diminuisce.
- Spegnerne il pulsante di accensione durante la disinstallazione del prodotto.
- Se utilizzi pneumatici con trazione elettrica, assicurati che abbiano la pressione corretta.

## 10. MANUTENZIONE E PULIZIA

Dovresti mantenere la trazione della tua sedia a rotelle elettrica così come altri prodotti tecnici. Dopo la manutenzione, sarai in grado di mantenere il tuo prodotto nelle migliori condizioni. Seguire i seguenti suggerimenti per la manutenzione.

### 9.1. PRIMA DI OGNI UTILIZZO

- Controllare se il pneumatico è fangoso o danneggiato, poiché ciò influirà sull'uso dello strappo, pulirlo; Se lo pneumatico è danneggiato, rivolgersi al reparto di manutenzione professionale per ripararlo.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate.
- Durante la guida, verificare l'uso della rottura, se l'effetto non è buono, contattare il rivenditore.
- Controllare la pressione dei pneumatici e gonfiarli se necessario.

### 9.2. OGNI DUE MESI

**Controllare, lubrificare, regolare le seguenti parti:**

- Asse e freno.

### 9.3. OGNI SEI MESI

**Controllare di seguito in base alla frequenza di utilizzo:**

- Pulito, in condizioni generali e condizioni dei pneumatici.

### 9.4. PULIZIA DELLA SUPERFICIE

- Utilizzare un panno per pulire la superficie con acqua calda.
- Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente delicato.
- Utilizzare una spugna o una spazzola morbida per rimuovere le macchie.
- Non utilizzare solventi con solventi detergenti aggressivi, né utilizzare una spazzola dura.
- Non utilizzare vapore o pressione per risciacquare.

### 9.5. PULIZIA DELLE PARTI IN PLASTICA

- Utilizzare solo una spazzola morbida o una spugna morbida e pulire le parti in plastica con un detergente per parti in plastica.

### 9.6. PULIZIA DEL RIVESTIMENTO

La superficie di alta qualità può garantire la migliore resistenza alla corrosione. Se la superficie esterna è graffiata o danneggiata in altro modo, contattare il rivenditore per riparare la superficie interessata.

- Durante la pulizia, utilizzare una spazzola o un panno morbido, nonché comuni detergenti domestici e acqua calda per garantire che il tubo non si bagni.
- La parte zincata deve essere pulita esclusivamente con un panno asciutto, mentre lo sporco ostinato può essere lucidato con un idoneo detergente per zinco.

## 10. RECUPERO DA INCIDENTE

Fallito	Motivo del fallimento
<b>Impossibile attivare la trazione elettrica</b>	L'interruttore di alimentazione non è acceso. L'interruttore della batteria non è acceso. Il connettore della batteria non è collegato. Guasto della batteria. Controllo danneggiato. Cavo danneggiato. Contatto scarso.
<b>Il controllo non risponde</b>	Controllo danneggiato. Cavo danneggiato. Contatto scarso. Motore danneggiato.
<b>La batteria non si carica</b>	La batteria non si collega al caricabatterie. Spina danneggiata. Caricabatterie danneggiato. Connettore danneggiato.

## 11. GARANZIA

### DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è protetto da questa garanzia, a causa del difetto di conformità del cliente che si manifesti entro il termine di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

### AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore dovrà continuare a rivolgersi alla parte venditrice per ottenere la riparazione del difetto di conformità del bene, ma se necessario, l'utente dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso per motivi di fabbricazione e non per uso improprio o mancanza di manutenzione.

L'ambito territoriale della presente Garanzia si estende all'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti di a disposizione del consumatore in conformità con le disposizioni del regio decreto legge 7/2021, del 27 aprile, recepimento delle direttive dell'Unione Europea in difesa dei consumatori.

### PROCEDURA PER RENDERE EFFICACE LA GARANZIA

Affinché la Garanzia abbia effetto, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita in cui ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, sia perché chiuso, sia perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, è possibile contattare direttamente il produttore tramite e-mail all'indirizzo [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

È indispensabile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o ricevuta d'acquisto, oppure una bolla di consegna successiva alla fattura o ricevuta, riportante chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore dovrà consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnando una nota esplicativa del difetto di conformità.

### QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente non rispettando le istruzioni indicate in questo manuale o causati da altri fattori umani, uso improprio, collisione con un oggetto...
- Danni causati da incidenti, abusi, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non riporti o il cui numero di serie o di fabbrica sia alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti ad usura.
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, S.L..

**NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.**

**CONTACTE CON SU PROVEEDOR.**

## Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme al MDR

**Manuale d' uso**

Scooter Zoe Handbike

**V1 · 19/01/2022**