



InfinityX

Cadeira de rodas
elétrica dobrável

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref: SEPALINFINITY20P42B

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas elétrica **InfinityX**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes do cadeira	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Antes de começar	7
5 — Utilização e montagem	7
6 — Manutenção e limpeza	10
7 — Resolução de problemas	10
7 — Aplicação Infinity	11
8 — Garantia	13

1. PARTES DO CADEIRA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA DOBRÁVEL

A cadeira de rodas Infinity pode ser dobrada e desdobrada automaticamente com o premir de um botão.

O movimento omnidireccional das rodas dianteiras faz com que se sinta mais confortável ao conduzir em terrenos irregulares.

Proporciona confiança graças ao sensor giroscópico integrado, quando o terreno é complexo e afeta a segurança do utilizador, regula automaticamente a velocidade e abrandando para proporcionar firmeza ao utilizador. Seja em subida ou em descida, se soltar o joystick, a cadeira de rodas travará imediatamente, garantindo a máxima segurança.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



 infinityx



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas	
Largura total	63 cm
Profundidade global sem apoio para os pés	89 cm
Profundidade global	107 cm
Altura total	93 cm
Altura do assento ao chão	55 cm

Dimensões dobradas	
Profundidade dobrada	84,5 cm
Altura total dobrada	38 cm

Peso	
Peso total sem bateria	38,15 kg
Peso total com bateria	41,50 kg
Peso máximo suportado	120 kg

Material	Alumínio	Cor	Branco
----------	----------	-----	--------

Assento	
Largura de assento utilizável	45 cm
Largura do assento	41 cm
Profundidade do assento	43 cm
Tipo de assento	Acolchoado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Motor**

Potência do motor	2 x 200 W
Bateria	20 Ah (lítio)
Número de baterias	1
Autonomia	15 a 20 km (20 Ah)
Velocidade máxima	7 km/h
Carregador externo	3 Ah

Encosto

Largura do encosto	39 cm
Altura do encosto	47 cm
Tipo de encosto	Fixa
Material de encosto	Acolchoamento

Apoios de braços

Comprimento do braço de apoio	36 cm
Largura do apoio de braço	3,5 cm
Tipo de apoio de braço	Dobradura
Material de apoio ao braço	Plástico

Apoio para os pés

Tipo de apoio para os pés	Plataforma dobrável
Material do apoio para os pés	Alumínio

Rodas

Medidas da roda dianteira	Ø25,5 cm
Medidas da roda traseira	Ø25,5 cm
Largura das rodas dianteiras	6,5 cm
Largura da roda traseira	6,5 cm
Tipo de rodas dianteiras	Omnidireccional
Tipo de rodas traseiras	Insuflável / Sólido

Outras características

Altura máxima do lancil	6 cm
Almofadagem	Rodas frontais
App	Android / iOS
Certificado para voar	Sim, por favor pergunte
Cinto de segurança	Sim
Trompa	Sim
Travões	Travões eletromagnéticos
Joystick	Esquerda / Direita
Luzes de cauda	Led, à prova de água
Marcha atrás	Sim
Inclinação máxima de escalada	15°
Dobrável	Electrónico (5")
Raio de viragem	730 mm
Rodas anti-volteio	Sim

*Unidade de controlo**Encosto com luz LED**Roda omnidireccional*

4. ANTES DE COMEÇAR

Ao operar a cadeira de rodas pela primeira vez, tente escolher terreno nivelado para garantir que o seu ambiente esteja livre de barreiras e pedões.

A carga máxima da cadeira de rodas é de 120 kg, por favor não conduzir sobrecarregada, apenas uma pessoa pode utilizar a cadeira de rodas.

Certifique-se de que o assento está totalmente implantado. Certifique-se de que o cinto de segurança da cadeira está apertado.

Sentar-se na cadeira corretamente e empurrar suavemente o joystick para o controlo manual. A cadeira irá avançar, recuar, virar à esquerda ou à direita; depois de soltar o joystick, a cadeira irá parar. Pratique estas funções básicas para que domine realmente a operação.

Limpar os obstáculos nas proximidades ao virar. Por favor, não faça curvas apertadas no pavimento ou na estrada.

A cadeira de rodas deve ser operada lentamente quando se opera num ambiente difícil (por exemplo, ao entrar por uma porta ou ao virar). É recomendado ajustar a velocidade da cadeira de rodas ao mínimo em ambientes difíceis.

Verificar se a cadeira de rodas está em boas condições, por exemplo, se cada desempenho é normal.

A cadeira desliga-se automaticamente após ser deixada por 30 minutos.



5. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM




5.1. USO COMANDO DO CONTROLO

Joystick:

Empurrar o joystick para controlar a direcção e a velocidade da cadeira.

Botão de alimentação /Botão de bloqueio

Premir o botão ON/OFF  durante dois segundos para activar a potência da cadeira de rodas. Para desligar a cadeira de rodas, premir novamente o botão de ON/OFF durante 2 segundos .

Quando se liga a cadeira, ao lado do ícone de alimentação  encontrará o botão de bloqueio  com uma luz acesa ; pressionar para desbloquear.



Botão "+" velocidade:

Prima para aumentar a velocidade; prima durante muito tempo o botão "+" para entrar no modo de cruzeiro de velocidade constante, prima o joystick para a frente para iniciar a cadeira.

Botão "-" velocidade:

Diminui a velocidade quando pressionado.



+ velocidade




- velocidade

Botão da buzina

Carregar brevemente no botão da buzina uma vez, o som da buzina será emitido uma vez.

Luz de estado de bloqueio da cadeira:

Quando se liga a cadeira, esta fica bloqueada por defeito e não é possível controlar ou mover a cadeira. Para poder utilizar o modo de controlo, a cadeira deve estar bloqueada. O APP não funcionará se a luz de estado da fechadura não estiver acesa.

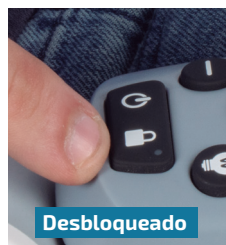**Botão SOS:**

Se premir durante 3 segundos, soará um longo alarme, o APP regista que o botão é premido.

**Botão "Modo novato":**

Os parâmetros de condução das caixas de viagem são automaticamente ajustados às mudanças e aos dados adequados para a prática de iniciação.



5.2. USANDO O MENU DE VISUALIZAÇÃO DE LCD

Indicador de potência

O dispositivo controla o indicador de potência, que mostra a potência em tempo real, dividido em 5 divisões.

**Visualização da velocidade**

O visor LCD mostra a velocidade de condução da cadeira de rodas em KM/H, e a precisão da visualização da velocidade é de mais ou menos 5%.

Marcha da velocidade

Prima o botão "+" uma vez para aumentar um nível, até 5 níveis, e prima o botão "-" uma vez para diminuir um nível, até um nível. As funções acima referidas também podem ser implementadas na APP.

Exibição do código de falha

O número de diagnóstico exibido pelas informações de diagnóstico incorporadas no produto. Para o conteúdo do número, ver a secção 7. *Resolução de problemas*.

Visualização do estado do Bluetooth

O Bluetooth não está ligado, o LCD Bluetooth está desligado.

Após ligação Bluetooth, a luz indicadora LCD Bluetooth está acesa.

Exibição da percentagem da bateria

O nível da bateria é apresentado como uma percentagem, e as funções acima referidas também podem ser implementadas na APP.



5.3. USO DA CARGA DA CADEIRA

- **Método 1:** Ligar o carregador e inserir a ficha do carregador sob a unidade de controlo.



- **Método 2:** Retirar a bateria e inserir o carregador na porta de carga da caixa da bateria para carregar a bateria.



5.4. UTILIZAÇÃO DE DOBRAGEM E DESDOBRAGEM

Dobrar a cadeira de rodas eléctrica:

Pressionar o "botão da buzina" e "- velocidade" na cadeira ao mesmo tempo durante 3 segundos.




Implantação da cadeira de rodas eléctrica:

Pressionar o "botão da buzina" e "+ velocidade" na cadeira ao mesmo tempo durante 3 segundos.



5.5. UTILIZAÇÃO DA LIBERTAÇÃO DO TRAVÃO (RODA LIVRE)

Prima o botão "+" e o botão "-" ao mesmo tempo, para entrar no modo de pressão, prima o botão de bloqueio  para desbloquear a cadeira e sacudir o joystick para sair do modo push.




5.6. MONTAGEM PARA REMOÇÃO DE BATERIAS

Remoção de bateria: Travar a bateria e levantar a bateria para cima.



Substituição da bateria: Colocar a bateria no compartimento da bateria e fechar o trinco.

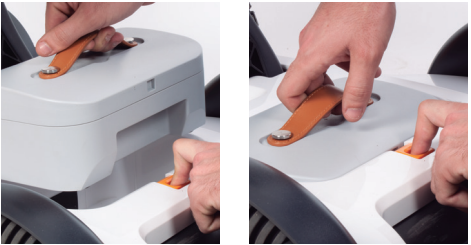

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

⚠ A cadeira de rodas não é submetida a testes de colisão e, portanto, não pode ser utilizada para transporte em veículos adaptados.

Verificar regularmente (semanal ou mensalmente, dependendo da frequência de utilização) se as peças de ligação da armação, tais como parafusos, porcas, etc., não estão soltas, caindo, enferrujando, etc.

Verificar regularmente se há encravamento, flacidez e outras condições nas juntas dobráveis móveis.

Verificar regularmente os pneus para detectar sinais de envelhecimento e aumento do desgaste dos pneus.

Em caso de chuva ou tempo húmido durante a utilização, a cadeira deve ser limpa o mais cedo possível para evitar humidade e ferrugem.

As cadeiras devem tentar evitar a exposição ao sol em tempo quente.

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ao ligar para o número de serviço pós-venda 935942066 para comunicar a reparação, é necessário o código de avaria.

Com a função do dispositivo de informação de diagnóstico incorporado no produto, o número de diagnóstico apresentado pode reflectir condições anormais.

Código de erro	Estado anormal
E1	Chaves inusitadas
E2	Joystick anormal
E3	Erro GPRS
E4	Falha da bateria
E5	Falha no interruptor
E6	Dispositivo em falta
E7	Falha de Bluetooth
E8	Falha de motor

8. APLICAÇÃO INFINITYX


8.1. ONDE DESCARREGAR A APLICAÇÃO INFINITYX

A aplicação pode ser descarregada através do seguinte link ou na App Store e Google Play: www.infinityx.com/app



8.2. LIGAR O BLUETOOTH

Iniciar a aplicação e premir o botão azul para procurar a cadeira, o Bluetooth deve estar ligado.

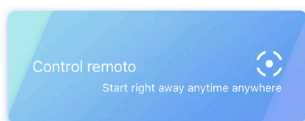


Uma vez conectado, no painel de controle da cadeira de rodas, pressione o botão de bloqueio para poder usar o controle remoto do seu dispositivo.

8.3. FUNÇÕES DO MENU PRINCIPAL

Desligar a cadeira: Ao premir este botão, a cadeira desliga-se, para a voltar a ligar, deve fazê-lo a partir do painel de controlo da cadeira.



Dobrado e desdobrado: Pressione e segure para a esquerda para dobrar a cadeira ou para a direita para a desdobrar.

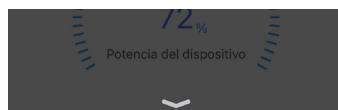

Cancel

Done



Pulse en


Expandir

Doblar



Medidor de bateria: Descreve a quantidade de bateria que a sua cadeira de rodas tem em percentagens.



Controlo remoto: Será capaz de controlar a sua cadeira à distância interagindo com o joystick digital.


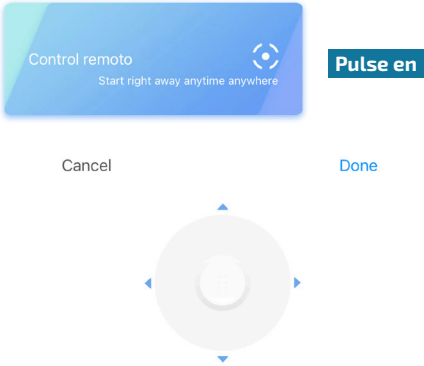


Informação sobre a bateria: Detalhes sobre o estado e percentagem da cadeira de rodas.

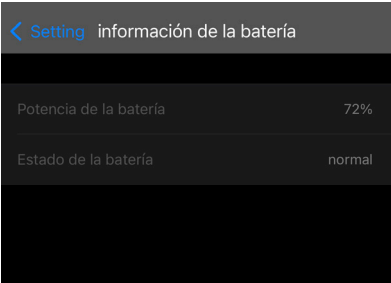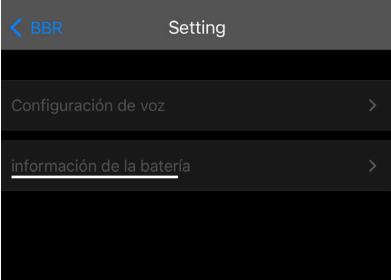

8.4. CONFIGURAÇÃO GERAL

Configuração de voz: Nesta secção, pode configurar o sistema de volume da sua cadeira de rodas.

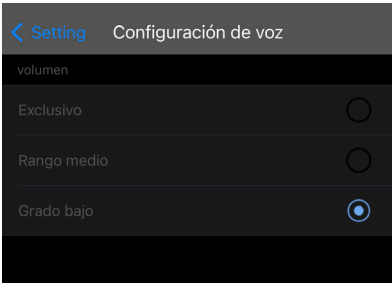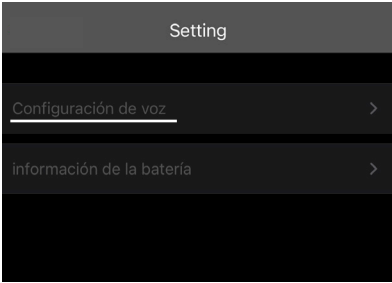

8. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

infinityx

O movimento omnidireccional das rodas dianteiras faz com que se sinta mais confortável ao conduzir em terrenos irregulares.



Proporciona confiança graças ao sensor giroscópio integrado, quando o terreno é complexo e afecta a segurança do utilizador, regula automaticamente a velocidade



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica dobrável, InfinityX

V1 · 02/06/2022