



Forum

Andarilho e
carrinho de compras

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. AALFORUMG



mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA VOSSA CONFIANÇA

Obrigado por adquirir um produto da **IM** by **TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e resistiu aos testes mais exigentes.

A experiência adquirida ao longo do tempo permite que os nossos produtos ofereçam os melhores desempenhos, para que possa usufruir cada vez mais da liberdade e da autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos-lhe que leia atentamente as instruções fornecidas. Este permitirá familiarizar-se com o seu novo andarilho e carrinho de compras **Forum**, o que lhe permitirá tirar o máximo partido do seu desempenho e da sua vida útil.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes do andarilho Forum.....	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Caraterísticas do produto	5
4 — Utilização e montagem.....	6
5 — Manutenção e limpeza	7
6 — Segurança e outras informações	8
7 — Garantia.....	9

1. PARTES DO ANDARILHO FORUM



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANDARILHO E CARRINHO DE COMPRAS

Faça compras com estilo, conforto e total segurança com o inovador andador e carrinho de compras Forum. Esta solução versátil combina praticidade, elegância e funcionalidade para facilitar a sua vida quotidiana.

Possui um engenhoso cesto dobrável que, quando o assento é rebatido, se transforma num cesto duplo, semelhante a um carrinho de compras

tradicional, com uma capacidade até 49 litros. O andador e carrinho de compras Forum distingue-se pelo seu design ultra-compacto, com uma largura total de apenas 53 cm e uma profundidade de 67 cm. Graças às suas pequenas dimensões, ao seu peso reduzido de 8,5 kg e às rodas dianteiras duplas giratórias, oferece uma manobrabilidade excepcional tanto no interior como no exterior.

3. CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

forum



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas	
Largura total	53 cm
Largura entre as rodas traseiras	35 cm
Profundidade total	67 cm
Altura total (6 níveis)	81 - 96 cm
Dobrado (L x A x P)	53x85x52 cm
Peso	
Peso total	8,50 kg
Peso máximo suportado	136 kg
Material	
Alumínio	
Cor	
Cor chassis	Preto mate
Tecidos de cor	Cinzeno escuro



Carrinho de compras, com cesto duplo dobrável com capacidade para 49 litros


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento	
Largura do banco	37 cm
Largura utilizável do assento (tamanho)	40 cm
Profundidade do assento	37 cm
Altura do assento ao chão	51 cm
Tipo de banco	Abatible
Encosto	
Largura do encosto	37 cm
Altura do encosto	17 cm
Tipo de encosto	Dobrável
Tipo de caso	Removível e lavável
Rodas	
Medidas da roda dianteira	Ø20 cm
Medidas da roda traseira	Ø14 cm
Largura da roda	4 cm
Tipo de roda	Sólido
Cesta externa	
Medidas	32 x 55 x 28 cm
Habilidade	49 l.
Peso má. cesto suportado	20 kg
Tipo de cesto	Removível e lavável
Outros recursos	
Tipo de travão	Alavanca/bloqueio do travão
Tipo de apoio de braço	Dobrável

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

4.1. MONTAGEM DE ANDARILHO

Retire o andarilho Forum da caixa e monte as pernas nas rodas traseiras. Utilize os botões azuis para fixar ambas as pernas no lugar.

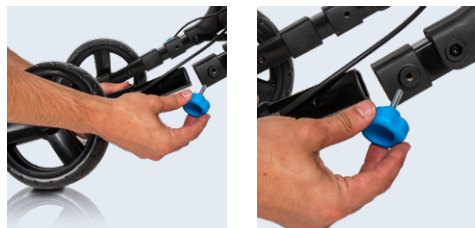

4.2. AJUSTE DE ALTURA

A barra permite um fácil ajuste da altura, removendo os dois botões laterais. Com 6 níveis de regulação, pode ser ajustado entre 81 cm e 96 cm. Para isso, retire os botões de ambos os lados, coloque-os num dos 6 níveis e certifique-se de que ambos os lados estão ao mesmo nível.



4.3. DOBRAR E DESDOBRAR

Para dobrar o andarilho, dobre primeiro o encosto para trás. De seguida, segure a estrutura do cesto com uma mão e o punho com a outra e junte os dois elementos. O andarilho irá dobrar. Para implementar, repita o processo pela ordem inversa.



4.4. USO DE TRAVÕES

Travão de serviço: Para travar o andarilho durante a utilização, puxe a alavanca para a frente.

Travão de bloqueio: para bloquear e estacionar o andarilho, quando estiver sentado, por exemplo, puxe a alavanca na sua direção. O andarilho será bloqueado.



4.5. BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS

As rodas dianteiras giratórias duplas podem ser bloqueadas na posição reta. Para tal, coloque as rodas em linha reta e puxe a alavanca para cima, garantindo que estão seguras. Verifique se ambos os lados estão na mesma posição.



4.6. UTILIZANDO O SISTEMA DE PISTA DE OBSTÁCULOS

O passadiço está equipado com um sistema de dupla roda traseira que facilita a superação de obstáculos, como passagens ou outros elementos.





4.7. COLOCAÇÃO DA BOLSA EXTERIOR

Coloque a bolsa no cabide do andarilho e prenda-a à estrutura com o velcro. O lado com a pequena etiqueta TotalCare Europe corresponde à parte frontal do andarilho.




4.8. APOIO DO BRAÇO

Para rebater o apoio de braço, puxe a pega saliente para a frente. Uma vez desbloqueado, pode baixar facilmente o apoio de braço.

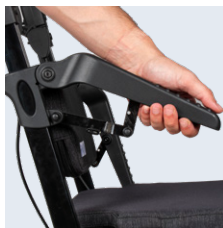
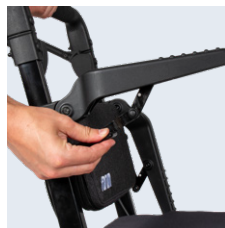


4.9. FIXAÇÃO DO SACO DOBRÁVEL DUPLO

Para utilizar o saco exterior duplo, rebata primeiro o assento e o encosto para trás.

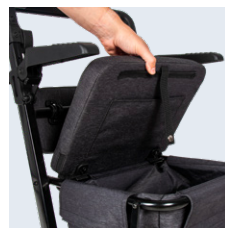

Em seguida, desdobre a bolsa e fixe-a na base interior do assento utilizando o fecho. Depois de fixado, fixe o assento ao encosto com o clipe para garantir que o cesto duplo está firmemente no lugar.

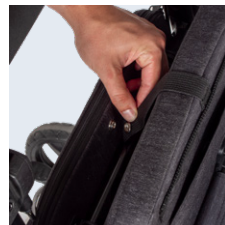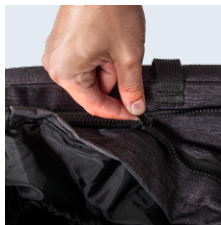

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Manutenção

A sujidade normal nas peças metálicas e plásticas pode ser removida com produtos de limpeza.

Verifique o conteúdo dos agentes de limpeza e utilize apenas produtos adequados para limpeza e desinfeção. Não utilizar solventes ou agentes de limpeza abrasivos, apesar da estrutura sólida e da utilização de materiais resistentes e anticorrosivos, o andarilho está sujeito a desgaste, pelo que é recomendável verificar o andarilho regularmente (pelo menos uma vez por ano).

Esta verificação deve incluir: Uma verificação visual de todas as partes da estrutura: se estão dobradas, danificadas, gastas ou corroídas e, em particular, uma verificação das seguintes

- Estrutura do caminhante.
- Barras de empurrar, pegas e pega.

- Puxadores de travão e cabos de travão.
- Garfos e rodas dianteiras.
- Rodas traseiras bloqueadas.
- Assento e dispositivo de bloqueio.
- Saco de compras.
- Verifique se faltam peças de montagem (por exemplo, porcas, parafusos, rebites...) e se estão a funcionar e apertadas.
- Verifique o funcionamento dos travões diminuindo a velocidade e travando as rodas.

Limpeza

A limpeza e desinfeção devem ser realizadas a intervalos regulares. Utilize uma solução de sabão neutro sem abrasivos.

Os métodos padrão podem ser utilizados para desinfeção. Não utilize equipamentos de injeção de vapor ou produtos de limpeza corrosivos ou de limpeza.

6. SEGURANÇA E MAIS INFORMAÇÕES



CUIDADO

Não utilizar o andarilho como cadeira de rodas ou cadeira de transporte.

- Utilizar o assento apenas para estar sentado.
- Nunca se sente e empurre com os pés.
- Não utilizar para subir ou descer escadas, escadas rolantes ou tapetes rolantes..

Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para determinar a utilização e o ajuste adequados da regulação em altura para obter o máximo apoio e a ativação adequada do travão.

Certifique-se de que ambos os botões de regulação da altura estão bem apertados e que as pegas estão à mesma altura. Teste a estabilidade antes da utilização.

Certifique-se de que o andarilho está totalmente aberto, que o assento está na posição correta e que as dobradiças estão corretamente colocadas.

Verificar se as regulações em altura estão corretas e se as rodas se movem livremente antes da utilização.

Respeitar o limite de peso do produto.

Substituir as rodas quando estiverem gastas ou

danificadas. Verificar semanalmente se as rodas dianteiras apresentam sinais de danos.

Interromper a utilização do andarilho se as rodas estiverem soltas e devolver ao local de compra para serem ajustadas.

Não expor a temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas), humidade ou molhagem para evitar a deformação das peças de plástico.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo quando o andarilho estiver a ser utilizado, de modo a mantê-lo equilibrado.

Para evitar que se vire:

- Não pegue em objectos se tiver de se deslocar para a frente enquanto estiver sentado no andarilho.
- Não pendure nada no andarilho.
- O encosto deve estar sempre no lugar e não foi concebido para suportar o peso total do corpo.
- Se quiser alcançar ou apanhar um objeto, deve colocar os dois pés firmemente no chão.
- Não adicione peso extra ao andarilho quando estiver sentado.
- Não utilize o assento se estiver num declive ou num terreno irregular.
- O cesto tem uma capacidade de 5 kg e os objectos não devem ficar salientes.
- Para travar temporariamente o andarilho, prima os dois punhos ao mesmo tempo.

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

forum



forum



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilho e carrinho de compras, **Forum**

V2 · 11/11/2024