



# DU 06

Ayudas de baño

**MANUAL DE USUARIO**

Ref. BSDPALDU06FN

más de 50 años viviendo sin límites

**!** Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DESDE TOTALCARE EUROPE

# LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla de ducha **DU 06**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 – Partes de la silla.....</b>           | <b>4</b>  |
| <b>2 – Descripción del producto .....</b>    | <b>4</b>  |
| <b>3 – Características del producto.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>4 – Insatación y uso .....</b>            | <b>6</b>  |
| <b>5 – Mantenimiento y limpieza .....</b>    | <b>8</b>  |
| <b>6 – Aviso .....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>7 – Garantía.....</b>                     | <b>10</b> |

## 1. PARTES DE LA SILLA



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### SILLA INODORO CON RUEDAS Y REPOSAPIÉS

Es una silla inodoro que está construida principalmente con un marco de aluminio pintado con polvo. Viene con tapizado de PU que es duradero y fácil de limpiar. El cubo es desmontable y fácil de limpiar. Los reposabrazos abatibles son para un transporte seguro y fácil. Las ruedas

giratorias de 5" son muy adecuadas para su uso en interiores. Las ruedas traseras son fáciles de apretar y soltar, puede presionar los frenos de estacionamiento para bloquear las ruedas. La capacidad máxima de peso de la silla inodoro es de 100 kg.

### 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



DU 06

#### INFORMACIÓN GENERAL

##### Medidas

|  |          |
|--|----------|
| <b>Ancho total</b>                         | 57,5 cm  |
| <b>Profundidad total</b>                   | 85 cm    |
| <b>Profundidad sin reposapiés</b>          | 60 cm    |
| <b>Alto total</b>                          | 103,5 cm |
| <b>Alto del asiento al suelo</b>           | 53,5 cm  |
| <b>Ancho del asiento</b>                   | 45,5 cm  |
| <b>Profundidad del asiento</b>             | 41 cm    |
| <b>Ancho del respaldo</b>                  | 46,5 cm  |
| <b>Alto del respaldo</b>                   | 23,5 cm  |
| <b>Ancho abertura para la cubeta</b>       | 18 cm    |
| <b>Profundidad abertura para la cubeta</b> | 36 cm    |

##### Peso

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Peso total</b>            | 12,90 kg |
| <b>Peso sin la cubeta</b>    | 12,60 kg |
| <b>Peso máximo soportado</b> | 100 kg   |

## Ruedas

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Medidas ruedas delanteras | Ø 12 cm       |
| Medidas ruedas traseras   | Ø 12 cm       |
| Tipo de ruedas            | Macizas       |
| Freno                     | Freno bloqueo |

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| Material | Acero | Color | Negro |
|----------|-------|-------|-------|

## 4. INSTALACIÓN Y USO

### 4.1. RECUENTO DE LAS PIEZAS

Compruebe el estado de los componentes antes de iniciar el montaje para detectar posibles daños derivados de un transporte o almacenamiento inadecuados.



### 4.2. SEPARACIÓN DE PIEZAS

Con un cutter, corte las bridas que mantienen unidos los tubos del chasis base.



### 4.3. UNIÓN BASE

Una las dos mitades de la estructura de la silla mediante el tubo de conexión y los tornillos roscados. Se debe colocar la pieza de plástico negro en ambos extremos del tubo de unión.




### 4.4. INSERTAR LAS RUEDAS

Inserte las ruedas en el marco y luego asegúrelas con los pasadores. Hágalo como se muestra en dicha imagen. Las ruedas con freno deben ir en la parte posterior.



#### 4.5. INSERTAR RESPALDO

Inserte el respaldo encajándolo en la parte posterior de la silla y fíjelo con los pomos roscados.

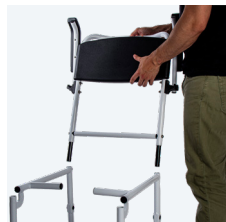

#### 4.8. COLOCACIÓN DE LA CINCHA

Coloque la cincha con el velcro abrazando un reposapiés en cada uno de sus extremos.




#### 4.6. FIJACIÓN DEL ASIENTO

Coja el asiento entero y colóquelo encima de la estructura. Presione con firmeza en los laterales para que el clipaje quede fijo en el tubo.



#### 4.7. INSERTAR EL REPOSAPIÉS

Inserte el reposapiés en el marco. Una vez insertado, gire los reposapiés hacia dentro hasta que se bloqueen en su posición, hágalo como se muestra en dicha imagen.

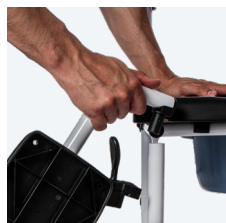

#### IMPORTANTE

**Es fundamental comprobar que toda la tornillería esté correctamente fijada. Antes de utilizar la silla inodoro DU06, verifique que todos los tornillos estén bien apretados y correctamente instalados.**

**Realice revisiones periódicas de la tornillería para garantizar un uso seguro del producto.**

## 5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Se recomienda revisar el producto al menos una vez por semana.
- Comprobar el correcto apriete de los tornillos, el estado de los elementos de fijación, comprobar que el cuadro no tenga grietas, evaluar visualmente el estado de desgaste de las ruedas.
- Utilice sólo accesorios originales. El uso de piezas no originales puede dañar el producto y puede causar peligros en su uso.
- Las ruedas, los accesorios de goma, las empuñaduras, los frenos que están sujetos para que se desgasten naturalmente y deben ser reemplazadas regularmente.
- Añada regularmente una cantidad adecuada de aceite lubricante a las piezas giratorias.
- Limpiar regularmente el producto con un detergente suave y un limpiador no abrasivo.
- Utilice un detergente neutro y agua tibia para la limpieza. No utilice materiales de limpieza abrasivos.
- Después de lavar, enjuague con agua limpia y limpie con un paño seco.
- No utilice chorros de agua directos y, en cualquier caso, espere a que el producto esté completamente seco antes de utilizarlo.
- Después de cada uso de la silla inodoro, el cubo y el asiento deben estar impecables y desinfectados. Utilice desinfectantes comunes para limpiarla.
- Luego se colocan en un ambiente seco y ventilado.

## 6. AVISO

- Por favor, asegúrese de que la silla del inodoro esté completamente expandida, el asiento del inodoro debe estar en posición baja antes de su uso.
- Asegúrese de que todos los tornillos/pomos giratorios estén bien apretados.
- Asegúrese de que las pinzas sobresalgan por el agujero de cada pata. Esto asegurará que las patas estén bien fijadas en su posición.
- Compruebe que ambas ruedas se mueven libremente y que no hay acumulación de residuos alrededor del eje.
- Pruebe la estabilidad de la silla inodoro y el mecanismo de freno antes de utilizarla.
- Utilice los apoyabrazos sólo como ayuda. No intente utilizar los brazos para soportar todo el peso del cuerpo.
- Los brazos deben estar levantados para ayudar a la transferencia hacia y desde el dispositivo.
- Los usuarios con fuerza física limitada deben ser supervisados o asistidos mientras usan el inodoro.
- Usar sólo en una superficie firme y nivelada.
- Antes de utilizar el producto, asegúrese de que el producto es estable, sólido y que todos los tornillos están bien apretados y el cubo está insertado en la posición correcta.
- No exceda la capacidad de carga máxima del producto.
- Nunca se pare en el asiento ni lo utilice como escalón. Esto puede causar caídas y cargas inadecuadas.
- Utilícelo sólo en superficies planas y sólidas, evite todos los peligros potenciales como la inclinación, las superficies desiguales o blandas, los obstáculos de la carretera, los suelos húmedos y resbaladizos, etc.
- Utilícelo con precaución. No agarre las asas con las manos mojadas, podrían resbalar y perder el agarre.

## 7. GARANTÍA

### DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por un defecto de fabricación del producto que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 2 años desde la compra del producto, a partir del tercer año, para hacer valer la garantía, el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor también deberá dirigirse preferiblemente al punto de venta donde adquirió el producto. En el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunidad autónoma, podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com). El cual podrá dirigirle al punto de venta más cercano a su domicilio.

Es imprescindible presentar **copia de la factura o del ticket de compra** en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha. Así como el **justificante del pago** para importes de más de 1000€. También deberá ser acompañado con una nota explicativa de la falta de conformidad y una fotografía del número de serie.

### LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario, negligencia, por no obedecer las instrucciones indicadas en este manual, causadas por otros factores humanos, por colisión con algún objeto o por daños causado por un tercero.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas, cualquier evento de la naturaleza o de fuerza mayor.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante.
- Los daños ocasionados por el transporte o por un mal embalaje.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste provocados por el uso, tales como: Ruedas, tapizados, almohadillas de reposabrazos, electrofreno, bombillas, baterías, etc....
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

**NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.**

**CONTACTE CON SU PROVEEDOR.**

## SILLA INODORO CON RUEDAS Y REPOSAPIÉS DU 06

Es una silla inodoro que está construida principalmente con un marco de aluminio pintado con polvo. Viene con tapizado de PU que es duradero y fácil de limpiar. El cubo es desmontable y fácil de limpiar.



## Leyenda etiquetaje



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.