



Madagaskar

Scooter grande
con amortiguaciones

MANUAL DE USUARIO

Ref. SCACMADAGA260H45G40R

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo scooter eléctrico **Madagaskar**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta/e.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 — Partes de la silla.....	4
2 — Descripción del producto	4
3 — Características del producto	5
4 — Precauciones y advertencias	7
5 — Uso del scooter.....	8
6 — Uso del mando bluetooth	12
7 — Método de carga y precauciones.....	13
8— Inspección y ajustes diarios	14
9 — Tabla de fallos comunes.....	14
10 — Garantía	11

1. PARTES DEL SCOOTER



	Explicación
1	Estado de la batería
2	Velocidad de conducción
3	Apagar/encender
4	Marcha atrás
5	Regulación de + velocidad
6	Regulación de - velocidad
7	Intermitente izquierdo (un clic)
8	Bocina
9	Luces de cruce y largas
10	Luz de posición
11	Intermitente derecho
12	Hacia delante



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SCOOTER GRANDE CON AMORTIGUACIONES Y PANTALLA DE 7"

El scooter Madagascar destaca por su diseño elegante y su excepcional rendimiento. Con un potente motor de 500W y cuatro baterías de gel de 20 Ah, ofrece una experiencia de conducción incomparable, con una autonomía de 25 a 30 km y una velocidad máxima de 15 km/h. Su sistema de amortiguación en las cuatro ruedas garantiza una conducción suave y segura.

La pantalla táctil de 7 pulgadas proporciona información esencial como velocidad, capacidad de la batería y trayecto recorrido. Además, su avanzado sistema de altavoces integrado permite disfrutar de música, con conectividad bluetooth y radio incorporada. Equipado con un completo sistema de luces LED y un asiento acolchado regulable en profundidad con respaldo reclinable.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	63 cm
Profundidad total	136 cm
Alto total	150 cm
Ancho total plegada	65 cm

Peso

Peso total	90 kg
Peso máximo soportado	120 kg

Material	Aluminio	Color	Rojo / Gris
----------	----------	-------	-------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	50 cm
Profundidad del asiento	40 cm
Tipo de asiento	Regulable en profundidad

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	32 cm
Ancho del reposabrazos	8 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles y regulables en inclinación

Respaldo

Ancho del respaldo	46 cm
Alto del respaldo con reposacabezas	72 a 77 cm
Tipo de respaldo	Reclinable

Ruedas


Medidas ruedas	Ø 32 cm
Ancho ruedas	10 cm
Tipo de ruedas	Hinchables

Motor

Potencia motor	500 W
Batería	4 x 20 Ah (gel)
Número de baterías	4
Velocidad máxima	15 km/h
Autonomía	25 - 30 km
Tiempo de carga	±8 horas

Otras características

Altura hasta la parte superior de la plataforma	20 cm
Altura máxima bordillos	16 cm
Amortiguación	4 ruedas
Claxon	Sí
Luces delanteras, traseras e intermitentes	Sí
Máxima pendiente de escalada	20°
Parachoques	Delantero y trasero
Radio de giro	200 cm
Ruedas antivuelco	Sí
Tipo de frenos	Electromagnéticos

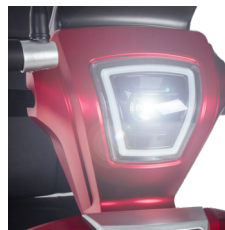

Luces LED



Pantalla táctil de 7"



Asiento regulable

4. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Encendido y apagado: inserte la llave en el interruptor de encendido y gírela en el sentido de las agujas del reloj. La luz de encendido se activará en la pantalla, indicando que la fuente de alimentación está conectada.

Circulación segura: circule por el carril de vehículos no motorizados a baja velocidad para garantizar su seguridad y la de los demás.

Arranque y marcha: después de un estacionamiento prolongado, regule nuevamente la velocidad y que corresponda a la situación de su entorno.

Al encender el scooter, tire de la palanca con su mano izquierda hacia atrás lentamente a una velocidad uniforme. Ajuste la potencia de salida según la velocidad deseada. Al retroceder, ajuste la potencia a la velocidad más baja.

Consejos para el uso eficiente: conduzca uniformemente y gradualmente contra el viento o en subidas para evitar carga excesiva en el motor y la batería.

En temporada de lluvias, evite mojar el motor y la batería manteniéndose fuera de la línea central de la rueda trasera.

Evite accionar el control de velocidad y el freno simultáneamente para prevenir sobrecargas en el motor y daños en otras partes.

Evite terrenos irregulares o empinados para evitar vibraciones que puedan afectar las partes eléctricas. Cumplimiento de Normas de Tráfico:



PRECAUCIÓN

Evite acelerar de forma instantánea para garantizar la seguridad de la conducción y proteger el motor y la batería.

Recuerde siempre conducir de manera segura y seguir las indicaciones para maximizar la durabilidad y rendimiento de su scooter eléctrico Madagaskar.

Control de Velocidad: Evite acelerar de manera instantánea para garantizar la seguridad durante la conducción y proteger tanto el motor como la batería.

4.1. NORMAS Y PRECAUCIONES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

- Siga estrictamente las normas de tráfico y conduzca en el carril de acuerdo con las regulaciones de tráfico.
- Está estrictamente prohibido transportar adultos y niños en el vehículo.
- Evite colgar objetos del manillar para garantizar un control adecuado y seguro del vehículo.
- Bajo la lluvia, utilice un poncho en lugar de un paraguas. No opere el vehículo con una sola mano.
- No limpie el vehículo directamente con agua. Evite lavar con pistolas de agua a alta presión para prevenir cortocircuitos eléctricos por humedad.
- Evite exceder la velocidad puesta abajo. A altas velocidades, no frene bruscamente ni conduzca con una sola mano para evitar riesgos por desplazamiento del centro de gravedad.
- No desmonte la carrocería del vehículo sin autorización, ya que esto puede generar riesgos potenciales para la seguridad y amenazas.
- Antes de montar, asegúrese de que las sujeciones sean seguras y fiables para prevenir accidentes.
- Evite conducir en desniveles, barro, grava y pasos peligrosos para evitar el riesgo de estallido de neumáticos y daño al vehículo.


5. USO DEL SCOOTER

5.1. USO DE LAS PALANCAS DE DIRECCIÓN

Hacia delante: Tire suavemente hacia abajo de la palanca de arranque derecha para hacer avanzar el vehículo. Coloque la palanca suavemente para detenerse.



Marcha atrás: Tire suavemente hacia abajo de la palanca de marcha atrás izquierda para hacer retroceder el vehículo. Coloque la palanca suavemente para detenerse.

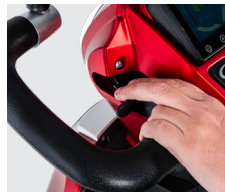

5.2. RECLINACIÓN DEL RESPALDO

Para reclinar el respaldo, tire de la palanca hacia arriba y ajuste a su preferencia.



5.3. REGULACIÓN DEL ASIENTO

Desde el lado derecho del scooter, encontrará una palanca debajo del asiento. Estire de la palanca hacia arriba y desplace el asiento hacia atrás o hacia adelante según su preferencia.



5.4. DESCONEXIÓN DEL MOTOR

La palanca de desembrague del motor está situada en la parte trasera izquierda del scooter. Esta palanca le permite desenganchar el mecanismo de manejo y empujar el scooter en modo 'rueda libre'. Para desengranar la transmisión, empuje la palanca hacia adelante hasta llegar a la posición de parada (indicada por la dirección 'N').

Simplemente empuje la palanca hacia la parte posterior del scooter para volver a enganchar el mecanismo de manejo (posición 'D'). El scooter no funcionará cuando la palanca esté en la posición desenganchada. El scooter debe apagarse y encenderse mediante el interruptor de encendido para restablecer los circuitos antes de que reanude el funcionamiento normal. El scooter emitirá un pitido continuo si el freno se desacopla al encenderlo.

Está prohibido desconectar el motor mientras esté en marcha circulando.



5.5. USO DEL SISTEMA DE LUCES

Cuenta con un sistema de luces LED completo, que incluye luces de posición, luces cortas y largas, así como intermitentes y luces de emergencia para una visibilidad óptima en cualquier situación.

Luces de posición: estas luces permanecen encendidas constantemente mientras el vehículo está en funcionamiento y no pueden ser apagadas.



Luces cortas: para activar las luces cortas del scooter Madagascar, pulse el botón indicado.



Luces largas: para activar las luces largas del scooter Madagascar, pulse el botón indicado.



Intermitentes: presione el botón "←" para señalar el giro a la izquierda y el botón "→" para señalar el giro a la derecha.




Luces de emergencia: mantenga presionado el botón "←△" para activar las luces de emergencia. Para desactivarlas, mantenga presionado el botón.



5.6. CONTROL DE VELOCIDAD

El scooter Madagascar alcanza una velocidad máxima de 15 km/h. Puede ajustar la velocidad utilizando los botones del panel de control.

Aumento de velocidad: para incrementar la potencia, presione el botón indicado. En la pantalla se mostrará el porcentaje de potencia, donde el 100% representa la velocidad máxima.

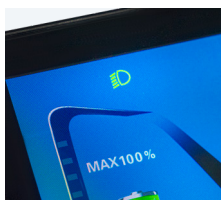

Disminución de velocidad: para reducir la potencia, presione el siguiente botón. En la pantalla se mostrará el porcentaje de potencia, donde el 5% representa la velocidad mínima.



5.7. CONEXIÓN USB

Está equipado con una práctica toma de carga USB, permitiéndole mantener su teléfono móvil cargado mientras se desplaza. Además, cuenta con un compartimento dedicado para que pueda dejar su dispositivo mientras se carga, manteniéndolo accesible en todo momento.




5.8. SINCRONIZACIÓN POR BLUETOOTH

Active el bluetooth en su dispositivo: antes de vincular su dispositivo móvil con el scooter Madagascar, asegúrese de activar la función bluetooth en su dispositivo.



Emparejamiento: busque el dispositivo "iMotor" entre los dispositivos disponibles en bluetooth y realice el emparejamiento.

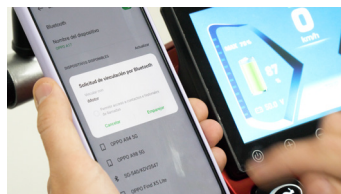

Confirmación: en la pantalla del scooter Madagascar, se mostrará la confirmación del emparejamiento.



Video ¿Cómo funciona el scooter Madagascar?

Escanee el código QR para visualizar el video explicativo

¡Se lo ponemos fácil, visualice el video y descubra el funcionamiento del Madagascar!



5.9. CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA


Activación del modo multimedia: mantenga presionado el botón "⏻" para ingresar al modo multimedia. Una vez activado, verá el modo activo indicado en la parte derecha de la pantalla.



Cambio de modo multimedia: el scooter Madagascar ofrece varios modos de multimedia disponibles, incluyendo música por bluetooth y radio. Para cambiar entre los modos, presione el botón "⏻".



Modo radio: para ajustar la sintonización, presione los botones "◀" y "▶" para seleccionar la emisora deseada.

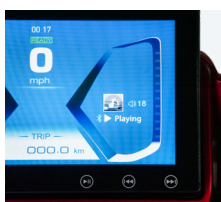


Modo música: para cambiar de canción, presione los botones "◀" y "▶" para seleccionar la siguiente o la anterior canción.




Activar / pausar: si está escuchando música y desea activar o pausar la reproducción, simplemente presione el botón "▶||".



Cambio de volumen: para ajustar el volumen de los altavoces del scooter Madagascar, presione los botones "+" y "-" para aumentar o disminuir el volumen, respectivamente.

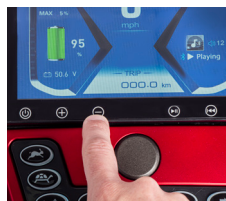

Desactivación de modo multimedia: mantenga presionado el botón "⏻" para salir del modo multimedia. Una vez desactivado, verá el texto "multimedia off" en la parte derecha de la pantalla.

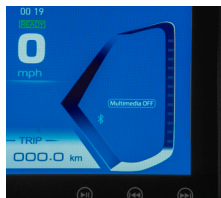


5.10. INFORMACIÓN DE LA PANTALLA

Además de los modos de multimedia, la pantalla del scooter Madagascar muestra la siguiente información:

Trip (distancia del trayecto):

El modo 'trip' muestra la distancia recorrida desde que se encendió el scooter hasta el momento actual. Proporciona el total de kilómetros recorridos durante el trayecto actual.

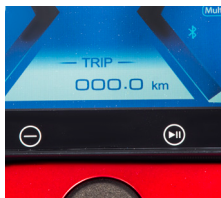


ODO (kilometraje total):

La función "ODO" registra todos los kilómetros recorridos por su vehículo a lo largo de su vida útil. Este dato se muestra brevemente cada vez que se enciende el scooter.



Cronómetro (tiempo de viaje):


En la parte superior de la pantalla, el cronómetro indica el tiempo transcurrido desde que el scooter se puso en marcha durante el trayecto actual.

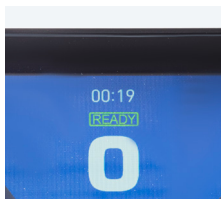


6 USO DEL MANDO BLUETOOTH

6.1. ENCENDIDO Y APAGADO A DISTANCIA


Ofrece un mando de control remoto bluetooth que permite gestionar el scooter de forma conveniente a distancia. Encienda y apague el scooter sin necesidad de insertar la llave en el contacto, además de activar y desactivar la alarma del sistema antirrobo con facilidad.

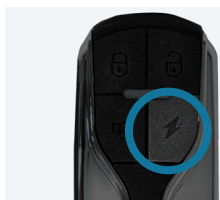

Encendido remoto: presione el botón indicado, para encender el scooter Madagascar de forma remota. Al hacerlo, no será necesario insertar las llaves en el contacto.

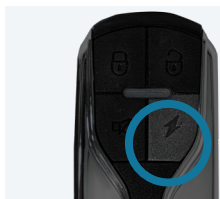

Apagado remoto: presione el botón indicado, para apagar el scooter de forma remota.

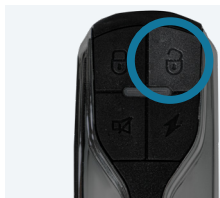


6.2. SISTEMA DE ALARMA

El scooter Madagascar ofrece la opción de activar un eficiente sistema antirrobo. Una vez activada la alarma, si el vehículo está apagado y detecta movimiento, la alarma se activará con un sonido potente y persistente hasta que se desactive correctamente o se detenga la manipulación no autorizada.


Activación de alarma: pulse el botón indicado para activar la alarma del scooter. Si el scooter está apagado y detecta movimiento, la alarma se activará, emitiendo un sonido estridente como medida de seguridad.



Silenciamiento de alarma: si la alarma está sonando, presione el botón indicado y dejará de sonar de inmediato.

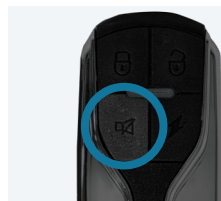

Desactivación de alarma: para desactivar la alarma, presione el siguiente botón y la alarma se desactivará en su scooter Madagascar.

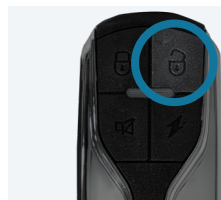

7. MÉTODO DE CARGA Y PRECAUCIONES

Las bajas temperaturas, el terreno irregular y el peso del usuario pueden afectar el rendimiento de la batería. El medidor de batería es solo una guía del nivel de carga restante en sus baterías y le dará su mejor indicación mientras el scooter está en movimiento.

Las baterías deben ser recomendadas por TOTAL CARE, si es necesario reemplazarlas un distribuidor autorizado de TOTAL CARE debe reear el reemplazo de la batería.

7.1. MÉTODO DE CARGA:

El indicador del cargador es "verde" cuando la batería está llena en el estado de carga flotante.

No es necesario cortar la alimentación en caso de emergencia; El indicador "naranja" también puede ser utilizado.

Pasos para cargar:

- No cierre el interruptor principal del vehículo.
- Conecte el enchufe de salida del cargador al zócalo de la carrocería del vehículo.
- Inserte el enchufe de alimentación del cargador en la toma de corriente AV220V.



7.2. INSTRUCCIONES DE CARGA:

Cuando el cargador está encendido para cargar la batería, el indicador de carga muestra un color rojo, indicando que la batería está en el estado de carga de corriente constante.

7.3. OTRAS PRECAUCIONES IMPORTANTES

Prevención de Ingresos No Deseados:

- Evite que líquidos y virutas metálicas penetren en el cargador durante el uso y almacenamiento para prevenir cortocircuitos y daños.

Temperatura y Ventilación:

- El cargador generará calor en la parte inferior, evite el contacto con artículos inflamables y explosivos.
- Utilice el cargador en un entorno bien ventilado, especialmente evite plásticos o espumas inflamables en la parte superior y los laterales del cargador.

Monitoreo e Inspección:

- Durante el proceso de carga, si detecta olores inusuales o la temperatura del cargador es superior a 65°C.



PRECAUCIÓN

No cargue las baterías por más de 12 horas. Cargue siempre las baterías en un área interior bien ventilada.

Debe seguir cargando las baterías incluso si el scooter no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo (2 a 3 semanas). De lo contrario, podría provocar daños permanentes y dejar las baterías inutilizables.


Siempre que sea posible, no interrumpa el ciclo de carga hasta que las baterías estén completamente cargadas. La interrupción continua puede dañar permanentemente las baterías. Si el cable de carga se daña, deje de usarlo inmediatamente y busque un reemplazo de su distribuidor.

8 MONTAJE DEL COFRE


En caso de haber adquirido el cofre posterior para el Madagaskar, siga las siguientes instrucciones para instalarlo. El cofre es un accesorio, no viene de serie con el scooter Madagaskar.

8.1. COLOCACIÓN DEL SOPORTE


Extracción de espigas roscadas: Desatornille las 3 espigas de cada lado del asiento del scooter para liberar los agujeros.

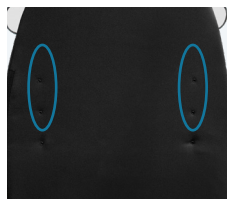

Fijación soporte: Alinee el soporte en los agujeros y fíjelo con un tornillo y una arandela en cada uno.

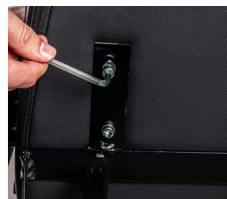

Fijación del cofre: Con la ayuda de una llave allen, fije el cofre en el soporte con un tornillo con arandela y una tuerca en cada uno de los agujeros.

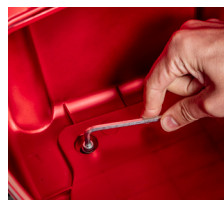

Comprobación final: Revise que el cofre ha quedado bien sujeto y es estable.



8.2 COLOCACIÓN DEL COFRE

Una vez fijado el soporte, puede proceder a la colocación del cofre.

Apertura de cofre y extracción de espuma:

Abra el cofre y quite la espuma de la parte inferior para dejar al descubierto los agujeros del cofre.



9. INSPECCIÓN Y AJUSTES DIARIOS

9.1. COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FRENOS:

¿Las barras de freno izquierda y derecha están en buen estado? ¿La alimentación se corta automáticamente durante el frenado?

Al circular a 20 km/h, la frenada de emergencia debe permitir estacionarse de forma segura en un radio de 5 m. Si la distancia de frenado es larga, ajuste los frenos y reemplace las pastillas desgastadas.

Las ruedas delanteras y traseras no están conectadas a la red eléctrica. ¿El ralentí es normal? ¿Hay resistencia a la fricción? Ajuste el sistema de frenos usando el tornillo de elevación en el tapacubos de freno para que la mano de freno pueda sostener con seguridad 1/2 del freno.

9.2. INSPECCIÓN Y AJUSTE DE OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD:

¿La presión de los neumáticos delanteros y traseros es normal? Infle a tiempo si la presión de aire es insuficiente.

¿Funcionan correctamente los intermitentes izquierdo y derecho y las luces traseras?

¿La liberación de freno funciona correctamente

10. TABLA DE FALLOS COMUNES

Posibles fallos comunes	
Encienda la fuente de alimentación de su cargador, y el cargador no muestra la luz	• Si el interruptor de llave está abierto; • Si el enchufe de alimentación está insertado; • Se habrá averiado el interruptor eléctrico.
Encienda la fuente de alimentación, el controlador funciona normalmente, gire el mango, pero el motor no gira	• Compruebe si la línea de control de la mano derecha se cae, si el controlador o la articulación del motor se caen; • La velocidad inicial no es suficiente y se necesita ayuda externa; • Si las barras de interruptores izquierda y derecha están apagadas.
El scooter es laborioso y de baja velocidad	• Compruebe si el freno está bloqueado; • Si la presión de los neumáticos es la adecuada; • Si el voltaje de la batería es suficiente, si insuficiente, por favor carga; • Si más allá de la rampa límite o viento en contra.
Se le agota rapidamente la batería	• Si la batería está colocada durante mucho tiempo, recárguela; • Si la presión de los neumáticos es insuficiente; • Compruebe si el freno está demasiado apretado; • Si la carga de la batería es suficiente; • Si la batería está cuesta arriba o contra el viento; • Si la temperatura es demasiado baja.
La batería no se puede cargar	• Compruebe el cargador y la fuente de alimentación, si la conexión de la batería está intacta y es fiable; • Si la fuente de alimentación externa está cargada y la tensión es normal.

11. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

MADAGASKAR



MADAGASKAR



Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.

Manual de usuario

Scooter grande con amortiguaciones

V4 · 24/09/2026