



4060

Andador paso a paso

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe


(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

4060

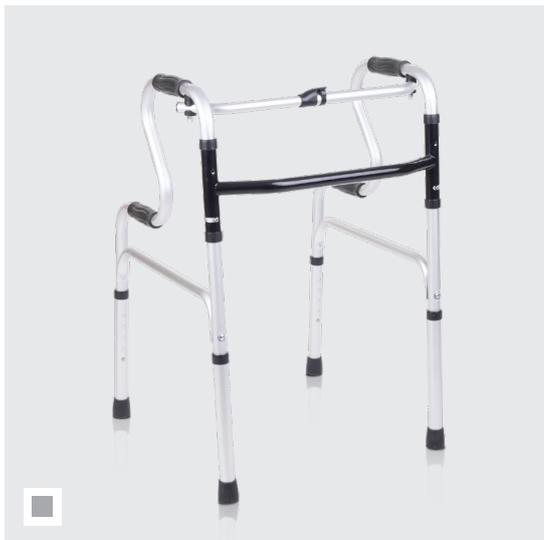

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	56 cm
Ancho entre ruedas traseras	48,5 cm
Profundidad total	54,5 cm
Profundidad plegado	9,5 cm
Alto total (regulable)	78 - 88 cm

Peso

Peso total	2,40 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material

Aluminio

Color

Plata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras características

Plegable	Sí
Material empuñaduras	Goma

ANDADOR PASO A PASO FIJO Y RECÍPROCO PLEGABLE SIN ASIENTO

El andador fijo-recíproco 4060 se caracteriza por ofrecer al usuario su uso como andador fijo y la posibilidad de cambiar a recíproco (en un solo click), según su necesidad.

El modo recíproco permite avanzar paso a paso, gracias al movimiento articulado de los arcos laterales del caminador junto al movimiento de sus pies sin la necesidad de levantar el peso del caminador.

Fabricado en aluminio, es un andador ligero a la vez que muy resistente.

Su ancho total es de 56 cm, su profundidad es de 54,5 cm y el alto es regulable de 78 a 88 cm. La profundidad del andador cuando está plegado es de 9,5 cm.

DETALLES



Doble empuñadura



Regulable en altura



4060 plegado