



4030

Andador paso a paso

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.


TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

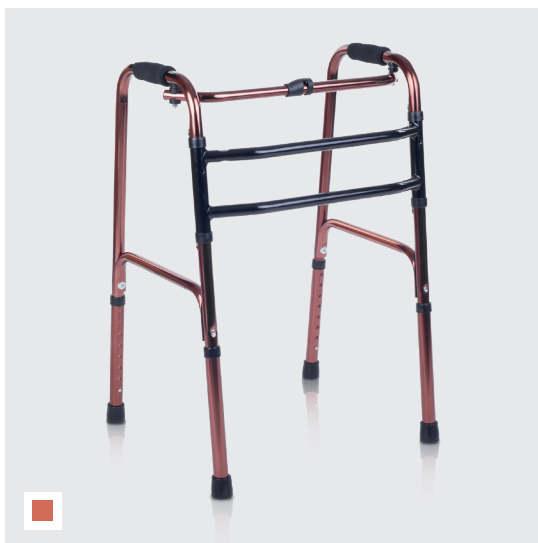

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ancho total | 57,5 cm |
| Ancho entre ruedas traseras | 47,5 cm |
| Profundidad total | 47 cm |
| Profundidad plegado | 9 cm |
| Alto total (regulable) | 77 - 94,5 cm |

Peso

| | |
|-----------------------|---------|
| Peso total | 2,45 kg |
| Peso máximo soportado | 100 kg |

ANDADOR PASO A PASO RECÍPROCO-FIJO Y PLEGABLE SIN ASIENTO

El andador fijo-recíproco 4060 se caracteriza por ofrecer al usuario su uso como andador fijo y la posibilidad de cambiar a recíproco (en un solo click), según su necesidad.

Permite avanzar paso a paso, gracias al movimiento articulado de los arcos laterales del caminador, junto al movimiento de sus pies, sin la necesidad de levantar el peso del caminador. Todo ello permite avanzar al usuario con el mínimo esfuerzo, de manera segura y sin riesgo de caer.

Su ancho total es de 57,5 cm, su profundidad es de 47 cm y el alto es regulable de 77 a 94,5 cm. La profundidad del andador cuando está plegado es de 9 cm.

Tiene un peso total de 2,45 kg y el peso máximo soportado es de 100 kg.

Material

Aluminio

Color


Cobre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras características

| | |
|----------------------|----------|
| Plegable | Sí |
| Material empuñaduras | Neopreno |

DETALLES

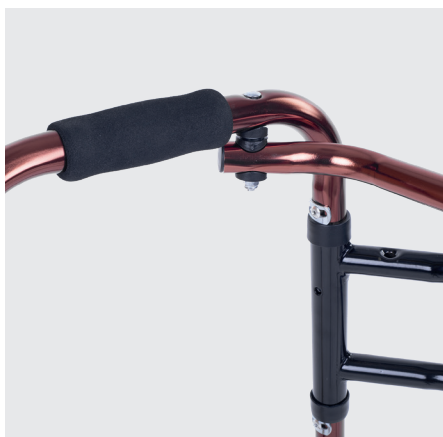

Empuñaduras de neopreno



Regulable en altura



4030 plegado