



**4030**

Andarilhos passo-a-passo

DETALHES TÉCNICOS

mais de 50 anos a viver sem limites

**! Nota importante**

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com


C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

**www.totalcare-europe.com**



## DETALHES TÉCNICOS

# 4030

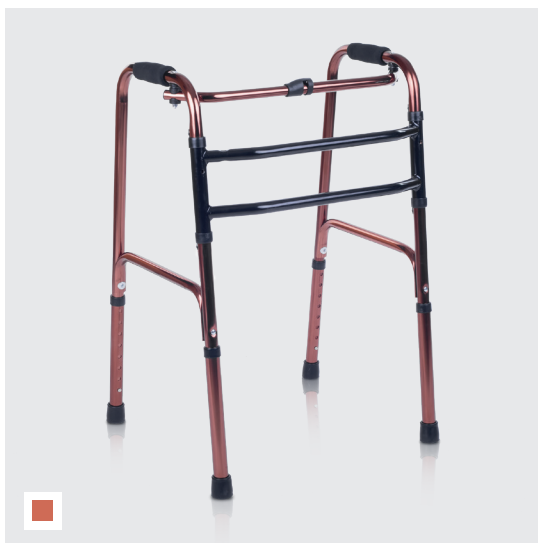

### ANDARILHO PASSO A PASSO RECÍPROCO- FIXO E DOBRÁVEL SEM ASSENTO

O andarilho fixo recíproco 4060 caracteriza-se por oferecer ao utilizador a sua utilização como andarilho fixo e a possibilidade de mudar para recíproco (num único clique), de acordo com as suas necessidades.

Permite ao utilizador avançar passo a passo, graças ao movimento articulado dos arcos laterais do andarilho, juntamente com o movimento dos pés, sem necessidade de levantar o peso do andarilho. Tudo isto permite ao utilizador avançar com o mínimo esforço, de forma segura e sem risco de queda.

A sua largura total é de 57,5 cm, a sua profundidade é de 47 cm e a altura é regulável de 77 a 94,5 cm. A profundidade do andarilho quando dobrado é de 9 cm.

Tem um peso total de 2,45 kg e o peso máximo suportado é de 100 kg.

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Medidas

Largura total	57,5 cm
Largura entre as rodas traseiras	47,5 cm
Profundidade geral	47 cm
Profundidade dobrada	9 cm
Altura total (ajustável)	77 - 94,5 cm

#### Peso

Peso total	2,45 kg
Peso máximo suportado	100 kg

#### Material

Alumínio

#### Cor


Cobre

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Outras características

Dobrável	Sim
Material das pegas	Neoprene

### DETALHES

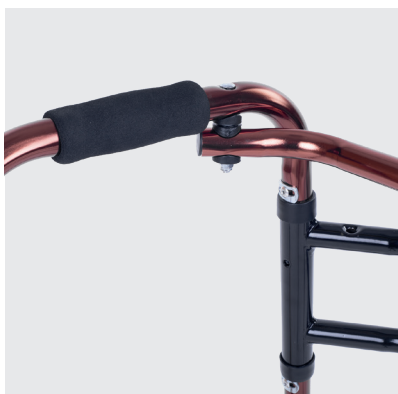

Empunhaduras de neopreno



Regulable en altura



4030 plegado