



**4030**

Andador paso a paso

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

**! Nota importante**

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.


**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

**www.totalcare-europe.com**

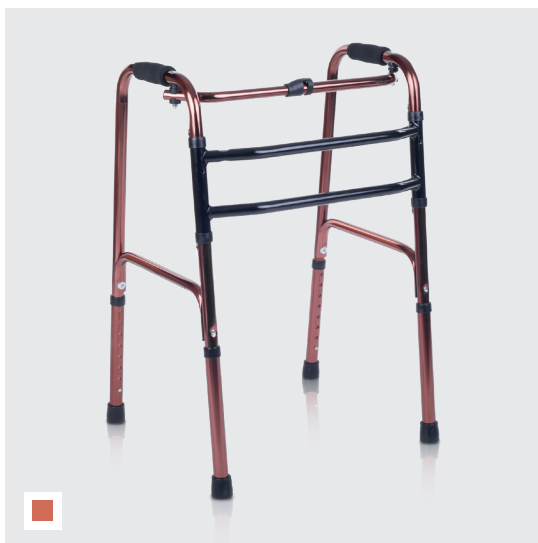

### ANDADOR PASO A PASO RECÍPROCO-FIJO Y PLEGABLE SIN ASIENTO

El andador fijo-recíproco 4030 se caracteriza por ofrecer al usuario su uso como andador fijo y la posibilidad de cambiar a recíproco (en un solo click), según su necesidad.

Permite avanzar paso a paso, gracias al movimiento articulado de los arcos laterales del caminador, junto al movimiento de sus pies, sin la necesidad de levantar el peso del caminador. Todo ello permite avanzar al usuario con el mínimo esfuerzo, de manera segura y sin riesgo de caer.

Su ancho total es de 57,5 cm, su profundidad es de 47 cm y el alto es regulable de 77 a 94,5 cm. La profundidad del andador cuando está plegado es de 9 cm.

Tiene un peso total de 2,45 kg y el peso máximo soportado es de 100 kg.

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Medidas

Ancho total	57,5 cm
Ancho entre ruedas traseras	47,5 cm
Profundidad total	47 cm
Profundidad plegado	9 cm
Alto total (regulable)	77 - 94,5 cm

#### Peso

Peso total	2,45 kg
Peso máximo soportado	100 kg

#### Material

Aluminio

#### Color


Cobre

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Otras características

Plegable	Sí
Material empuñaduras	Neopreno

### DETALLES

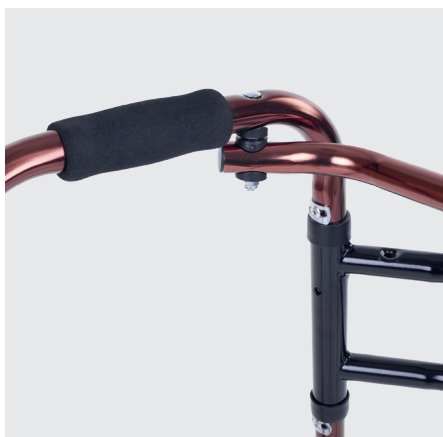

Empuñaduras de neopreno



Regulable en altura



4030 plegado