BY totalcare EUROPE

CE MD

PORTUGUÊS

martinika carbon evo



Martinika Carbon Evo

Cadeira de rodas elétrica dobrável

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SEPFCMACAREVO

mais de **60 anos** a viver **sem limites**

Nota importante

As características técnicas indicadas são meramente orientativas, uma vez que podem sofrer alterações de conceção consoante as necessidades de fabrico.

O produto apresentado neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso site para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066 info@totalcare-europe.com
C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

AGRADECEMOS-LHE A SUA CONFIANÇA

Obrigado por adquirir um produto da **IM** por **TotalCare Europe.**
O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e passou nos testes mais exigentes.

A experiência acumulada ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam as melhores prestações, permitindo-lhe desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita.

Sugerimos que reserve um momento para ler as instruções que lhe fornecemos. Assim, poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas elétrica **Martinika Carbon Evo**, o que lhe permitirá tirar o máximo partido e prolongar a vida útil do mesmo.

mais de **60 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Peças da Martinika Carbon Evo 4

2 — Descrição do produto 4

3 — Características do produto 5

4 — Instruções de segurança 7

5 — Funcionamento e riscos 9

6 — Utilização e montagem 10

7 — Bateria e carregamento 13

8 — Verificação e manutenção 15

9 — Resolução de problemas 16

10 — Garantia 17

1. PEÇAS DA MARTINIKA CARBON EVO



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA DOBRÁVEL EM FIBRA DE CARBONO

A Martinika Carbon Evo é a evolução da bem-sucedida Martinika Carbon, agora mais leve e compacta. Com apenas 10,90 kg sem bateria, posiciona-se como uma das cadeiras de rodas elétricas mais leves da sua categoria. Além disso, incorpora apoios para os pés rebatíveis e removíveis, que permitem reduzir a sua profundidade para apenas 77 cm, e destaca-se também pela sua largura compacta de 55,5 cm, ideal para espaços reduzidos.

Fabricada em fibra de carbono, suporta até 150 kg. Equipada com dois motores de 100 W, atinge os 6 km/h e dispõe de baterias de lítio de 12 Ah e 15 Ah, com a possibilidade de instalar duas baterias e atingir até 35 km de autonomia.

O seu design dobrável compacto e o peso ultraleve facilitam enormemente o seu manuseamento, transporte e armazenamento.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO











INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas	
Largura total	55,50 cm
Profundidade sem apoio para os pés	77 cm
Profundidade com apoio para os pés	99 cm
Altura total	94 cm
Altura do assento até ao chão, sem almofada	50 cm
Altura do assento até ao chão com almofada	53 cm

Dimensões quando dobrada	
Profundidade quando dobrado	77 cm
Dobrado na largura	28 cm
Muito dobrado	71 cm

Peso	
Peso total (sem bateria)	10,90 kg
Peso total (com bateria de 12 Ah)	12,70 kg
Peso total (com bateria de 15 Ah)	12,75 kg
Peso total (com 2 baterias de 12 Ah)	14,50 kg
Peso total (com 2 baterias de 15 Ah)	14,60 kg
Peso máximo suportado	150 kg

Material	Fibra de carbono

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento	
Largura do assento	44 cm
Largura útil para sentar (tamanho)	47 cm
Profundidade do assento	44 cm
Altura da almofada	3 cm

Motor	
Motor	2 x 100 W
Bateria	12 Ah / 15 Ah / 2 x 12 Ah / 2 x 15 Ah (lítio)
Número de baterias	1 o 2
Autonomia	10 - 15 km (12 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah) 25 - 30 km (2 x 12 Ah) / 30 - 35 km (2 x 15 Ah)
Velocidade máxima	6 km/h

Apoio para os braços	
Comprimento do apoio de braços	38 cm
Largura do apoio de braços	4 cm
Tipo de apoio para os braços	Rebatíveis

Apoio	
Largura do encosto	46 cm
Altura do encosto	42 cm
Tipo de encosto	Jogo / Cinta de fixação

Rodas	
Dimensões das rodas dianteiras	Ø 16 cm
Dimensões das rodas traseiras	Ø 26 cm
Largura das rodas dianteiras	4 cm
Largura das rodas traseiras	4,5 cm
Tipo de rodas	Macisas

Outras características	
Altura máxima dos lancis	2,50 cm
Saco	30 x 26 cm (largura x altura)
Cinto de segurança	Sim
Buzinar	Sim
Inclinação máxima de subida	10º
Raio de viragem	90 cm
Apoio para os pés	Removíveis e rebatíveis
Regulação da altura do apoio para os pés	2,5 cm
Rodas anti-capotamento	Fiji
Tipo de travões	Eletromagnéticos

*Antes de reservar um voo, recomendamos que contacte a companhia aérea para confirmar se esta permite o transporte de cadeiras de rodas elétricas com baterias.











4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4.1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o seu Martinika Carbon Evo e certifique-se de que compreende estas peças e de que

⚠ ATENÇÃO

todas elas estão presentes.

- Não circule em estradas muito movimentadas, com lama, cascalho, buracos, cobertas de neve ou gelo, nem em caminhos que não estejam protegidos.
- Nunca tente modificar fisicamente o Martinika Carbon Evo, incluindo a adição de componentes de terceiros, uma vez que essas alterações anularão a garantia e poderão afetar a conformidade e a avaliação de riscos.
- Não faça movimentos bruscos com o corpo, pois a cadeira pode ficar instável. Incline-se para a frente ao subir e incline-se para trás ao descer, controlando a velocidade até à posição mais baixa.

Utilização: Quando utilizar a sua cadeira de rodas elétrica em ruas ou passeios, aplicam-se as leis e os regulamentos locais.

4.2. ADVERTÊNCIAS GERAIS DE SEGURANÇA

OBRIGATÓRIO: Este manual do utilizador completo deve ser lido e compreendido na íntegra antes de utilizar e conduzir o Martinika Carbon Evo.

⚠ **AVISO:** O incumprimento das instruções descritas neste manual pode causar danos na cadeira elétrica ou lesões corporais ao utilizador.

⚠ **AVISO:** Nunca exceda a carga máxima admissível. Consulte a ficha técnica.

⚠ **AVISO:** Nunca conduza a cadeira de rodas elétrica sob o efeito de medicamentos ou álcool. Se estiver a tomar medicação, verifique com o seu médico se a sua capacidade de controlar a cadeira de rodas elétrica não será afetada.

A Martinika Carbon Evo foi concebida exclusivamente para ser utilizada por uma única pessoa com mobilidade reduzida; não é possível transportar mais ninguém juntamente com ela.

⚠ **AVISO:** Nunca tente sentar-se ou levantar-se da sua cadeira elétrica sem desligar primeiro o comando tipo joystick. Isto impedirá que a Martinika Carbon Evo se mova caso ocorra um contacto acidental com o joystick.

⚠ **AVISO:** Nunca desça nem suba uma inclinação superior à máxima recomendada (10º).

⚠ **AVISO:** Nunca atravesse uma inclinação, rampa, etc., em qualquer direção.

⚠ **AVISO:** Nunca utilize a cadeira elétrica sem as rodas antiviramento devidamente instaladas.

⚠ **AVISO:** Não utilize a Martinika Carbon Evo em areia, terreno irregular ou superfícies molhadas e/ou escorregadias.

⚠ **AVISO:** Esta cadeira de rodas elétrica não foi concebida para ser utilizada como assento num veículo a motor. A Martinika Carbon Evo pode falhar em caso de impacto com o veículo, causando lesões ao utilizador da cadeira de rodas elétrica ou a outras pessoas.

⚠ **AVISO:** Não utilize a cadeira elétrica se estiver avariada ou não funcionar corretamente.

⚠ **AVISO:** Antes de se inclinar ou esticar-se para a frente, apoie sempre as nádegas no encosto da cadeira e olhe para a frente, na direção das rodas.

⚠ **AVISO:** Nunca se coloque em pé no apoio para os pés, pois a cadeira elétrica pode virar e causar ferimentos ao utilizador.

⚠ **AVISO:** Coloque sempre a cadeira de rodas elétrica sobre uma superfície estável e plana antes de se sentar ou levantar dela.

⚠ **AVISO:** As rodas anticapotamento só são eficazes em superfícies firmes; em terrenos macios, como relva, neve ou lama, podem afundar-se. Além disso, ao ultrapassar a inclinação máxima, estas rodas poderão não impedir uma queda para trás.

4.3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Destina-se a ser utilizada tanto em espaços interiores como exteriores e em espaços reduzidos. O seu principal objetivo é proporcionar um transporte confortável ao utilizador. No entanto, é importante ter em conta que o peso e as dimensões do utilizador devem limitar-se a 150 kg. Além disso, esta cadeira não deve ser utilizada por pessoas com limitações físicas ou mentais evidentes que as impeçam de a manobrar com segurança.

4.4. CONTRAINDICAÇÃO

A Martinika Carbon Evo foi concebida exclusivamente para o transporte de adultos, excluindo mercadorias e crianças com menos de 16 anos. Além disso, não deve ser utilizada por pessoas que apresentem limitações físicas ou mentais que comprometam a sua capacidade de a conduzir com segurança no trânsito. Estas limitações podem incluir hemiplegia, paraplegia, perturbações mentais ou deficiência visual. É fundamental ter em conta estas contraindicações para garantir a segurança do utilizador e das pessoas à sua volta.

4.5. OBSERVAÇÕES SOBRE A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (CEM)

É importante ter em conta que as fontes de ondas eletromagnéticas, como os telemóveis, podem causar interferências na cadeira elétrica. Da mesma forma, os componentes eletrónicos internos da cadeira elétrica também podem afetar o funcionamento de outros dispositivos elétricos.

Para atenuar o efeito destas interferências eletromagnéticas, é fundamental seguir as seguintes recomendações:

⚠ **AVISO:** A cadeira elétrica pode perturbar o funcionamento de dispositivos próximos que emitem campos eletromagnéticos.

⚠ **AVISO:** Os campos eletromagnéticos, como os gerados por geradores elétricos ou fontes de alta potência, podem influenciar o desempenho de condução do Martinika.

⚠ **AVISO:** Evite utilizar televisores ou rádios portáteis perto da cadeira elétrica enquanto esta estiver em funcionamento, para evitar interferências.

⚠ **AVISO:** Antes de utilizar a cadeira de rodas elétrica, verifique se existem mastros de transmissão na zona e evite utilizá-la nas proximidades destes, para prevenir possíveis interferências.

⚠ **AVISO:** Caso sinta movimentos involuntários ou travagens inesperadas, desligue a cadeira de rodas elétrica assim que for seguro fazê-lo, para evitar situações perigosas.

4.6. POSSÍVEIS FONTES DE RADIAÇÃO:

Algumas fontes comuns de radiação incluem:

- Instalações portáteis de recetor e transmissor, tais como dispositivos com antenas fixas montadas diretamente na unidade transmissora.
- Telemóveis ou «walkie-talkies».
- Aparelhos portáteis de televisão, rádio e navegação.
- Outros dispositivos pessoais de transmissão.
- Dispositivos móveis de transmissão e receção de médio alcance, tais como antenas de automóvel com a antena montada no exterior do veículo.
- Conjuntos fixos de emissão e receção.
- Dispositivos fixos e móveis de transmissão e recepção.
- Sistemas fixos de rádio, televisão e navegação.
- Dispositivos emissores e recetores de longo alcance.
- Torres de rádio e televisão.
- Aparelhos de rádio.

É importante ter em conta que outros aparelhos domésticos, como leitores de CD, computadores portáteis, telefones sem fios, rádios AM/FM, máquinas de barbear elétricas e secadores de cabelo, geralmente não terão qualquer influência na sua cadeira de rodas elétrica, desde que funcionem corretamente e a sua cablagem esteja em bom estado. No entanto, é aconselhável seguir as instruções de utilização fornecidas com estes aparelhos elétricos para garantir um funcionamento sem problemas da cadeira de rodas elétrica.

4.7. RECOMENDAÇÕES:

Evite utilizar dispositivos portáteis, como rádios de banda cidadã (CB), ou ligar dispositivos de comunicação pessoais, como telemóveis, enquanto o veí-

culo motorizado estiver ligado.

Esteja atento a transmissores nas proximidades, como estações de rádio ou televisão, e tente evitar aproximar-se deles para minimizar possíveis interferências eletromagnéticas.

Caso sinta um movimento involuntário ou a libertação do travão, desligue o veículo motorizado assim que for seguro fazê-lo.

Tenha em atenção que a adição de acessórios ou componentes, ou qualquer modificação no veículo motorizado, pode aumentar a sua suscetibilidade a interferências eletromagnéticas. É importante ter este fator em conta ao efetuar modificações na cadeira de rodas elétrica.

5. FUNCIONAMENTO E PERIGOS

5.1. ANTES DE SE SENTAR NA SUA MARTINIKA CARBON EVO

- Antes de utilizar a sua Martinika Carbon Evo, é essencial efetuar algumas verificações para garantir a sua segurança e o seu bom funcionamento:
- Certifique-se de que o interruptor da caixa da bateria está na posição «On».
- Verifique se as alavancas de roda livre estão na posição «Drive».
- Verifique se a bateria está completamente carregada.
- Certifique-se de que aperta o cinto de segurança.
- Verifique se a cadeira elétrica está completamente aberta e se os tubos do assento estão corretamente encaixados nos suportes laterais.
- Certifique-se de que a alavanca do joystick está desligada para evitar movimentos acidentais, caso haja contacto acidental com o joystick.

5.2. INTRODUÇÃO

- Certifique-se de que está sentado de forma segura.
- Verifique se os apoios para os pés estão ajustados à altura correta para os seus pés.

5.3. DIREÇÃO

- Utilize o joystick para conduzir a cadeira de rodas elétrica. Recomenda-se ajustar a velocidade para o nível mais baixo até adquirir experiência e prática na sua utilização.
- Mantenha espaço livre suficiente ao virar a cadeira de rodas elétrica, para garantir que as rodas não encontrem obstáculos.
- Tenha especial cuidado ao conduzir em marcha-atrás.

5.4 CONDUÇÃO EM DECLIVES, SUBIDAS E RAMPAS

- Não suba nem desça inclinações que excedam o limite recomendado (10º).
- Ao subir ou descer inclinações, faça-o sempre em linha reta.
- Evite conduzir em declives, seja em que direção for, uma vez que isso poderá fazer com que a Martinika Carbon Evo capote e provoque lesões graves.
- Tente manter a cadeira de rodas elétrica em movimento ao subir ou descer uma inclinação. Se precisar de parar, volte a arrancar e acelere lentamente e com cuidado.
- Tenha em atenção que a distância de travagem da cadeira de rodas elétrica pode ser consideravelmente maior em declives do que em terreno plano.

6. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

6.1. PAINEL DE CONTROLO DA MARTINIKA CARBON EVO

Botão ON/OFF: Prima-o uma vez para ligar a cadeira elétrica e outra vez para a desligar.

Controlador joystick: Controle a direção do movimento. Empurre para a frente para avançar, puxe para trás para recuar, para a esquerda para virar à esquerda e para a direita para virar à direita.

Indicador da bateria: Mostra o nível de carga da bateria. O verde indica carga completa, o âmbar indica carga média e o vermelho indica que é necessário recarregar.

Indicador de velocidade: Mostra a velocidade definida com os botões de velocidade baixa ou alta.

Botão de velocidade elevada: Prima-o para aumentar a velocidade.

Botão de velocidade baixa: Prima-o para reduzir a velocidade.

Botão da buzina: Ative uma buzina de aviso para alertar os outros.

ATENÇÃO

É proibido desligar a alimentação durante a condução, uma vez que isso pode fazer com que a Martinika Carbon Evo pare repentinamente e possa capotar.

6.2. DOBRADO E DESDOBRADO

Desdobrado

Levante o encosto até que os pinos de mola encaixem corretamente na pega de empurrar.





Com ambas as mãos, pressione para baixo as travessas do assento até que a cadeira de rodas fique completamente aberta.



Dobrado

Segure o estofo do assento pelos dois lados e puxe para cima com ambas as mãos até que a cadeira fique completamente dobrada.



Segure os apoios de braços de ambos os lados e empurre-os para dentro simultaneamente até dobrar a cadeira de rodas.

Segure no guiador e prima o botão de dobragem. Entretanto, levante ligeiramente o guiador até que o pino de mola saia do orifício do manguito do guiador. Em seguida, dobre o guiador para baixo.





6.3. TRANSPORTE DA CADEIRA

Retire a almofada e puxe o estofo do assento para baixo: Retire a almofada e baixe o estofo do assento enquanto dobra a cadeira de rodas. Em seguida, deixe à vista as correias da pega em ambos os lados do assento.

Levante a cadeira de rodas pelas alças: Quando precisar de transportar a cadeira de rodas, pode levantar facilmente o produto na totalidade com as correias da pega.





6.4. UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

Segure a fivela do cinto de segurança e pressione para o desatar.

Alinhe a fivela com o encaixe e pressione para baixo até ouvir um «clique».





ATENÇÃO

Certifique-se de que não existem obstáculos à volta da Martinika Carbon Evo antes de a abrir ou dobrar.

Antes de abrir ou dobrar este produto, tenha cuidado com os dedos e mantenha a mão afastada das suas articulações mecânicas para evitar que as mãos fiquem presas.

Por favor, não se sente nem conduza esta cadeira de rodas elétrica quando estiver dobrada ou parcialmente aberta.

Por favor, aperte o cinto de segurança quando se sentar na Martinika Carbon Evo.

6.5. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS

Prima o botão vermelho na lateral.

O apoio de braços pode ser levantado ou baixado, facilitando assim a transferência na Martinika Carbon Evo.





6.6. AS RODAS ANTIVIRAGEM

A cadeira de rodas está equipada com rodas anti-capotamento, que servem para impedir que a cadeira capote em caso de emergência. As rodas anti-capotamento desta cadeira de rodas não podem ser desmontadas.





6.7. VERIFICAÇÃO DA BATERIA

Ativação e desativação da bateria: Utilize o botão de ativação para ligar ou desligar a bateria. Quando o botão **«ON»** Se estiver premido, a bateria está ativada. Para a desativar, prima o botão **«OFF»**.





Substituição da bateria: Se a sua Martinika Carbon Evo estiver equipada com duas baterias, utilize o botão seguinte para selecionar a que pretende utilizar. Prima o botão **«Eu»** para ativar a bateria da esquerda e **"O"** para a bateria da direita.

Se tiver selecionado um lado em que não haja bateria, a Martinika Carbon Evo não funcionará.





6.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO JOYSTICK DE CONTROLO

Para montar o joystick, ligue primeiro o cabo de ligação e, em seguida, insira-o no suporte do apoio de braços e aperte a rosca de fixação até ficar bem preso. Para o desmontar, siga os passos na ordem inversa.





6.9. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIBERTAÇÃO DO TRAVÃO

Para ativar o modo de roda livre, desloque a alavanca para a frente até à posição **Não**. Nesta posição, o travão fica desengatado e a cadeira pode ser empurrada manualmente. Para voltar ao modo elétrico, desloque a alavanca na sua direção até à posição **D**. O travão permanece ativado e a cadeira pode ser manobrada através do joystick. A cadeira não poderá ser empurrada manualmente.





Ao desbloquear os motores, a cadeira pode ser empurrada manualmente, embora as rodas possam apresentar uma ligeira resistência devido ao sistema de travão elétrico.


6.10. UTILIZAÇÃO DO APOIO PARA OS PÉS

Para **retirar os apoios para os pés**, pressione o pino de libertação rápida e puxe-os para fora. Para os colocar, insira-os novamente e fixe o pino. Antes de utilizar a cadeira, verifique se ficaram bem fixos e estáveis.





Para **ajustar a altura do apoio para os pés**, desaperte os parafusos e as porcas utilizando uma chave fixa de 10 mm e uma chave Allen de 5 mm. Em seguida, mude de orifício para ajustar a altura pretendida.

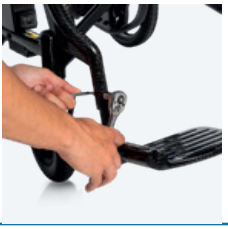



6.11. MONTAGEM DA BATERIA

Fixe as caixas da bateria em ambos os lados da cadeira de rodas. Existem quatro ranhuras e um cilindro na parte de trás da caixa da bateria para os alinhar com os orifícios e os pontos de apoio do suporte da bateria. Em seguida, pressione-os para baixo até ouvir um «clique» e as caixas da bateria ficarem bem fixas.





Antes de montar a bateria, certifique-se de que alinha o cilindro situado atrás da caixa da bateria com o orifício no suporte da bateria, o que permitirá fixar facilmente a bateria no seu lugar.

6.12. REMOÇÃO DA BATERIA

Pressione o botão situado na caixa da bateria e levante-a para a retirar.

Ao levantar a bateria, pode soltar a mão que está a pressionar o botão da caixa da bateria.





ATENÇÃO

Certifique-se de que o interruptor está na posição «ON», ou seja, que a alimentação está ligada.

Segure a caixa da bateria com ambas as mãos para evitar que caia ao montá-la e desmontá-la.

7. BATERIA E CARREGAMENTO

7.1. INFORMAÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES DE CARGA

- A sua cadeira de rodas elétrica requer uma bateria de lítio selada e que não necessita de manutenção. A bateria é recarregada através do sistema de carregamento externo fornecido.
- Carregue completamente a bateria da sua cadeira de rodas elétrica durante, pelo menos, 10 a 12 horas antes de a utilizar pela primeira vez. A bateria nova atingirá a sua capacidade total após ter sido submetida a cerca de 10 a 20 ciclos de carga (período de rodagem). Este período de rodagem é necessário para que a bateria funcione em pleno rendimento e tenha uma longa vida útil.
- Mantenha a bateria totalmente carregada para que a sua cadeira de rodas elétrica continue a funcionar sem problemas. Carregue a bateria diariamente após cada descarga, mesmo que tenha sido apenas uma descarga parcial. Dependendo do nível de descarga, podem demorar até 12 horas até que a bateria volte a estar totalmente carregada.
- Se o indicador da bateria tiver atingido o intervalo do LED vermelho, carregue a bateria durante, pelo menos, 16 horas, ignorando a indicação de carga completa!
- Mesmo que a cadeira de rodas elétrica não seja utilizada durante um longo período de tempo, a bateria deve ser carregada regularmente para garantir que se mantém totalmente carregada.
- Não mantenha a bateria com um nível de carga baixo sem a recarregar completamente com regularidade.
- Não carregue a bateria a temperaturas extremas. Não se recomenda carregar a bateria a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) nem a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F).
- Proteja o seu carregador de fontes de calor, como aquecedores e luz solar direta. Se o carregador de baterias sobreaquecer, a corrente de carga será reduzida e o processo de carregamento será atrasado.

7.2. CARREGAR AS BATERIAS

- Certifique-se de que lê e compreende o manual do utilizador do carregador de baterias, caso seja fornecido, bem como as notas de segurança do carregador.
- Desligue a alimentação da cadeira elétrica.
- Decida qual a tomada de carregamento utilizar; pode escolher entre duas tomadas de carregamento:

1. Ficha da caixa de baterias.
2. Tomada de alimentação do controlador.



Utilização: O botão da caixa da bateria deve estar na posição **«ON»** durante o carregamento, ou seja, com o carregamento a decorrer com a alimentação ligada.





⚠ **AVISO:** Antes de iniciar o carregamento, certifique-se de que liga o interruptor da caixa de baterias.

- Ligue a ficha do carregador à tomada.
- Não ligue o carregador de baterias até que todas as fichas estejam na sua posição.
- Durante o carregamento, a luz LED do carregador de baterias acenderá a amarelo.
- Assim que as baterias estiverem completamente carregadas, a luz LED do carregador de baterias passará a verde.
- Desligue o carregador da tomada antes de retirar a ficha do carregador da tomada de saída.

⚠ **AVISO:** Evite colocar a bateria perto de fontes de calor, como uma lareira ou um aquecedor.

⚠ **AVISO:** Existe o risco de explosão e danos nas baterias se for utilizado um carregador inadequado. Utilize apenas o carregador de baterias fornecido com o seu veículo ou um carregador que tenha sido aprovado pela Hi-Fortune.

⚠ **AVISO:** Nunca tente abrir ou desmontar o carregador. Se o carregador de baterias não parecer estar a funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor autorizado.

⚠ **AVISO:** Não utilize a bateria se esta emitir algum odor, gerar calor ou apresentar qualquer tipo de anomalia. Se a bateria estiver a ser utilizada ou a ser recarregada, retire-a imediatamente do aparelho ou do carregador e interrompa a sua utilização.

⚠ **AVISO:** Proteja sempre o carregador da água e carregue-o num ambiente seco para evitar riscos de choque elétrico e danos.

⚠ **AVISO:** Não tente recarregar as baterias ligando os cabos diretamente aos terminais das baterias, pois isso pode provocar curto-circuitos e choques elétricos.

⚠ **AVISO:** Utilize um cabo de extensão apenas se for absolutamente necessário e certifique-se de que se encontra em bom estado, para evitar riscos de incêndio e de choque elétrico.

⚠ **AVISO:** Não utilize a cadeira elétrica enquanto as baterias estiverem a carregar, para evitar lesões e danos.

⚠ **AVISO:** Para garantir um carregamento mais eficaz e seguro das baterias da sua cadeira de rodas elétrica, utilize apenas o carregador fornecido como equipamento original com o seu produto.

⚠ **AVISO:** Não tente retirar a bateria do compartimento nem voltar a colocá-la no lugar. Em caso de qualquer problema, contacte o seu fornecedor autorizado.

⚠ **AVISO:** Se o seu carregador de baterias não tiver sido concebido para utilização no exterior, evite expô-lo a condições meteorológicas adversas ou extremas, para evitar danos.

⚠ **AVISO:** Não armazene nem utilize a bateria em locais expostos a altas temperaturas, uma vez que isso pode reduzir o seu desempenho e encurtar a sua vida útil. Evite deixar a bateria no carro em dias quentes ou em locais expostos à luz solar direta.

8. VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Proteja a sua cadeira de rodas elétrica, levando-a a revisões regulares. Recomendamos vivamente que leve a sua Martinika Carbon Evo a ser revista, pelo menos uma vez por ano, pelo seu ortopedista, que utilizará apenas as peças de substituição adequadas. Esta inspeção periódica garantirá que a cadeira de rodas elétrica funcionará na perfeição durante anos. Há muitas coisas que pode fazer por si próprio para manter a sua cadeira de rodas elétrica em ótimas condições. Verifique a cadeira regularmente e mantenha-a em ótimas condições.

8.1. PNEUS E JANTARES

- Verifique periodicamente o desgaste dos pneus e substitua-os sempre que necessário.
- Certifique-se de que as rodas se movem livremente sem tocar em nada. A roda dianteira e o garfo devem mover-se livremente para garantir uma condução suave.

8.2. QUADRO TRANSVERSAL

- Verifique se a estrutura transversal da cadeira de rodas está em bom estado. Certifique-se de que a cadeira de rodas é fácil de dobrar e desdobrar.

8.3. ESTOFOS

- Verifique se o tecido apresenta buracos, fissuras ou pontos desgastados.
- Verifique se os orifícios de montagem do estofo estão corretamente alinhados e bem fixados.

8.4. LIMPEZA

- Limpe regularmente o estofo, o quadro, os componentes de plástico e as peças não elétricas da cadeira de rodas elétrica com um pano seco ou húmido.
- Não utilize água, óleo ou outras soluções químicas para limpar a sua cadeira de rodas elétrica. Certifique-se de que não salpica a cadeira de rodas elétrica com água, pois isso pode danificar os componentes eletrónicos.

8.5. FIM DA UTILIZAÇÃO

Este símbolo significa que o produto deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico, de acordo com a legislação e os regulamentos locais. No final da vida útil da cadeira de rodas, leve-a ao local de reciclagem designado. A triagem e a reciclagem ajudarão a preservar os recursos naturais e garantirão que seja reciclada de forma respeitosa para o ambiente.

A reciclagem de cada peça deve ser gerida por uma organização de reciclagem autorizada, designada de acordo com as leis e regulamentos locais. No que diz respeito às peças de plástico, ao quadro e aos tubos, estes podem ser entregues a unidades de reciclagem profissionais para eliminação, uma vez terminada a sua utilização.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Pode deduzir qual é a avaria com base no número de bipes.

A seguir, apresentamos uma lista de verificação para o auto-tratamento. Por favor, tente resolver o problema seguindo esta lista em primeiro lugar e, se o problema persistir, consulte o seu ortopedista.

Número de sons	Possível causa
2+1	O problema do controlador superior ou do controlador inferior
2+2	O motor do lado direito ou o conector apresentam um mau contacto
2+3	O travão direito ou o conector estão com mau contacto
2+4	O motor do lado esquerdo ou o conector têm um mau contacto
2+5	O travão esquerdo ou o conector têm um mau contacto
2+6	Sobrecorrente
2+7	Joystick ou cabo com mau contacto
2+8	Falha do controlador
2+9	Baixa tensão ou avaria do controlador

O exemplo de alarme apresentado indica que, se a sequência sonora for composta por dois bipes rápidos seguidos de cinco bipes lentos (2+5), isso representa um código de alarme específico. Neste caso, a avaria pode ser causada por problemas no travão esquerdo ou por um mau contacto no conector.

9.1 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:

Recomenda-se substituir a bateria uma vez por ano. Para tal, sugere-se que se dirija a um concessionário ou a um centro de assistência autorizado, onde poderão efetuar a substituição de forma adequada e utilizando baterias compatíveis com o modelo da cadeira de rodas elétrica.

9.2 SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS:

Recomenda-se substituir os pneus quando o padrão estiver desgastado até metade. Para tal, aconselha-se a contactar a agência ou o concessionário, que poderão sugerir pneus adequados para o modelo da cadeira de rodas elétrica e efetuar a substituição de forma profissional.

10. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto que adquiriu está abrangido pela presente garantia, no caso de qualquer falta de conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses a contar da data de compra do produto; a partir dos 2 anos e até aos 3 anos, o consumidor deve continuar a dirigir-se ao vendedor para obter a reparação da não conformidade do bem, mas, caso seja necessário, o utilizador deverá comprovar que o produto apresenta um defeito de fabrico e não resulta de uma utilização indevida ou de falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia abrange todo o território nacional espanhol.

A presente Garantia não prejudica os direitos de que o consumidor dispõe, nos termos do disposto no Decreto-Lei Real n.º 7/2021, de 27 de abril, relativo à transposição das diretivas da União Europeia em matéria de defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA FAZER VALER A GARANTIA

Para poder fazer valer a garantia, o consumidor deverá dirigir-se ao ponto de venda onde adquiriu o produto; caso não seja possível contactar o ponto de venda, seja porque este encerrou, seja porque o produto foi adquirido noutra comunidade autónoma, poderá contactar diretamente o fabricante através do endereço de e-mail info@totalcare-europe.com.

É imprescindível apresentar, no momento da reclamação, uma cópia da fatura ou do recibo de compra, ou uma guia de entrega posterior à fatura ou ao recibo, na qual constem claramente o produto adquirido e a data.

O consumidor deverá entregar o produto no mesmo local onde o adquiriu, juntamente com uma nota explicativa sobre a não conformidade.

A PRESENTE GARANTIA NÃO COBRE

- Os danos causados por utilização indevida por parte do utilizador, por não ter seguido as instruções indicadas neste manual, ou causados por outros fatores humanos, utilização indevida, colisão com algum objeto…
- Os danos causados por acidente, abuso, negligência ou utilização indevida.
- Os danos causados por incêndio, inundação, tempestades ou qualquer fenómeno natural.
- Os produtos que tenham sido previamente reparados ou manipulados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou pelo vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não tenha o número de série ou de fábrica, ou cujo número tenha sido alterado ou apagado.
- A garantia não cobre as peças sujeitas a desgaste.
- As reparações ou a substituição da peça defeituosa serão efetuadas por pessoal qualificado e autorizado pela TotalCare Europe, S.L.

NÃO UTILIZE ESTE PRODUTO SE ESTIVER VISIVELMENTE DANIFICADO OU SE FALTAR ALGUMA PEÇA.

ENTRE EM CONTACTO COM O SEU FORNECEDOR.

martinika carbon evo



WWW.TOTALCARE-EUROPE.COM

Legenda da rotulagem.

CE **Conformidade Europeia.**

Deve consultar o manual de instruções para obter informações de segurança.

Consulte o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

Dados do fabricante.

Data de fabrico.

EC REP **Representante Europeu.**

LOT **Todos eles**

REF **Referência do produto.**

SN **Número de série.**

MD **Produto de saúde em conformidade com o MDR.**



Vídeo MiTaller
Digitalize o código QR para aceder ao vídeo do manual do utilizador

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica dobrável **Martinika Carbon Evo**

V1 · 14/09/2026