BY totalcare EUROPE

CE MD

ITALIANO

martinika carbon evo



Martinika Carbon Evo

Sedia a rotelle elettrica pieghevole

MANUALE D'USO

Rif. SEPFCMACAREVO

più di **60 anni** vivendo **senza limiti**

Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono a titolo indicativo, in quanto possono subire modifiche di progettazione in base alle esigenze di produzione.

I prodotti presenti in questo catalogo non sono stati necessariamente fotografati nella loro configurazione standard.

Visitate il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066
info@totalcare-europe.com
C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

LA RINGRAZIAMO PER LA SUA FIDUCIA

Grazie per aver acquistato un prodotto di **IM** di **TotalCare Europe.**
Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più rigorosi.

Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni, i nostri prodotti offrono le migliori prestazioni, consentendovi di godere ogni giorno di più della libertà e dell'autonomia di cui avete bisogno.

Le consigliamo di dedicare qualche minuto alla lettura delle istruzioni che le abbiamo fornito. In questo modo potrà familiarizzare con la sua nuova sedia a rotelle elettrica **Martinika Carbon Evo**, che le consentirà di ottenere le massime prestazioni e la massima durata dello stesso.

più di **60 anni** vivendo **senza limiti**

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO.

È importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Componenti della Martinika Carbon Evo.....4

2 — Descrizione del prodotto.....4

3 — Caratteristiche del prodotto 5

4 — Istruzioni di sicurezza.....7

5 — Funzionamento e pericoli.....9

6 — Utilizzo e montaggio 10


7 — Batteria e ricarica.....13

8 — Controllo e manutenzione 15

9 — Risoluzione dei problemi.....16

10 — Garanzia.....17

1. PARTI DELLA MARTINIKA CARBON EVO

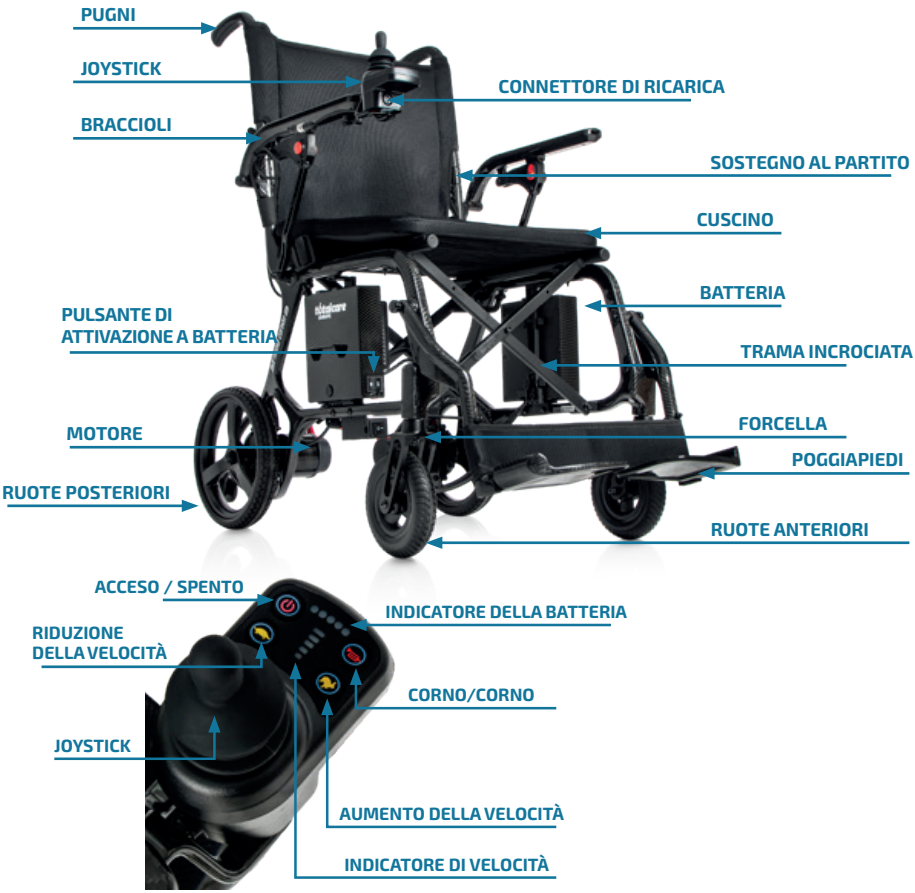

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEDIA A ROTELLE ELETTRICA PIEGHEVOLE IN FIBRA DI CARBONIO

La Martinika Carbon Evo è l'evoluzione della famosa Martinika Carbon, ora più leggera e compatta. Con un peso di soli 10,90 kg senza batteria, si posiziona come una delle sedie a rotelle elettriche più leggere della sua categoria. Inoltre, è dotata di poggiapiedi ribaltabili e rimovibili, che consentono di ridurne la profondità a soli 77 cm, e si distingue anche per la sua larghezza compatta di 55,5 cm, ideale per gli spazi ridotti.

Realizzata in fibra di carbonio, ha una portata massima di 150 kg. Dotata di due motori da 100 W, raggiunge i 6 km/h e dispone di batterie al litio da 12 Ah e 15 Ah, con la possibilità di installare due batterie e raggiungere un'autonomia fino a 35 km.

La sua struttura pieghevole compatta e il peso ultraleggero ne facilitano enormemente la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO











INFORMAZIONI GENERALI

Misure	
Larghezza totale	55,50 cm
Profondità senza poggiapiedi	77 cm
Profondità con poggiapiedi	99 cm
Altezza totale	94 cm
Altezza dal sedile al pavimento senza cuscino	50 cm
Altezza dal sedile al pavimento con cuscino	53 cm

Dimensioni da chiusa	
Profondità da chiuso	77 cm
A libro, largo	28 cm
Molto piegato	71 cm

Peso	
Peso totale (senza batteria)	10,90 kg
Peso totale (con batteria da 12 Ah)	12,70 kg
Peso totale (con batteria da 15 Ah)	12,75 kg
Peso totale (con 2 batterie da 12 Ah)	14,50 kg
Peso totale (con 2 batterie da 15 Ah)	14,60 kg
Peso massimo supportato	150 kg

Materiali	Fibra di carbonio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sedile	
Larghezza del sedile	44 cm
Larghezza utile per sedersi (taglia)	47 cm
Profondità della seduta	44 cm
Altezza del cuscino	tre centimetri

Motore	
Motore	2 x 100 W
Batteria	12 Ah / 15 Ah / 2 x 12 Ah / 2 x 15 Ah (litio)
Numero di batterie	1 o 2
Autonomia	10 - 15 km (12 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah) 25 - 30 km (2 x 12 Ah) / 30 - 35 km (2 x 15 Ah)
Velocità massima	6 km/h

Braccioli	
Lunghezza del bracciolo	38 cm
Larghezza del bracciolo	quattro centimetri
Tipo di bracciolo	A ribalta

Supporto	
Larghezza dello schienale	46 cm
Altezza dello schienale	42 cm
Tipo di supporto	Partita / Cinghia di serraggio

Ruote	
Dimensioni delle ruote anteriori	Ø 16 cm
Dimensioni delle ruote posteriori	Ø 26 cm
Larghezza delle ruote anteriori	quattro centimetri
Larghezza delle ruote posteriori	4,5 cm
Tipo di ruote	Massicci

Altre caratteristiche	
Altezza massima dei cordoli	2,50 cm
Borsa	30 x 26 cm (larghezza x altezza)
Cintura di sicurezza	Sì
Hooter	Sì
Pendenza massima di salita	10°
Raggio di sterzata	90 cm
Poggiapiedi	Rimuovibili e ribaltabili
Regolazione in altezza del poggiapiedi	2,5 cm
Ruote antiribaltamento	Fiji
Tipo di freni	Elettromagnetici

*Prima di prenotare un volo, ti consigliamo di contattare la compagnia aerea per verificare se sono ammesse sedie a rotelle elettriche a batteria.











4. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

4.1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Legga attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il suo Martinika Carbon Evo e si assicuri di aver compreso il contenuto di queste parti e che siano tutte presenti.

ATTENZIONE

- Non percorrere strade molto trafficate, fangose, con ghiaia, buche, ricoperte di neve o ghiaccio, né sentieri non protetti.
- Non tentare mai di apportare modifiche fisiche alla Martinika Carbon Evo, compresa l'aggiunta di componenti di terze parti, poiché tali modifiche invalideranno la garanzia e potrebbero influire sulla conformità e sulla valutazione dei rischi.
- Non muovere il corpo bruscamente, poiché la sedia potrebbe diventare instabile. Inclinati in avanti quando sali e inclinati all'indietro quando scendi, controllando la velocità nella posizione più bassa.

Utilizzo: Quando si utilizza la sedia a rotelle elettrica su strade o marciapiedi, si applicano le leggi e le normative locali.

4.2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

OBBLIGATORIO: È necessario leggere e comprendere integralmente il presente manuale d'uso prima di utilizzare e guidare la Martinika Carbon Evo.

⚠ **AVVERTENZA:** Il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale può causare danni alla sedia a rotelle elettrica o lesioni personali all'utente.

⚠ **AVVERTENZA:** Non superare mai il carico massimo ammesso. Consultare la scheda tecnica.

⚠ **AVVERTENZA:** Non guidare mai la sedia a rotelle elettrica sotto l'effetto di farmaci o alcol. Se sta assumendo farmaci, verifichi con il proprio medico che la sua capacità di controllare la sedia a rotelle elettrica non ne risenta.

La Martinika Carbon Evo è progettata esclusivamente per essere utilizzata da una sola persona con mobilità ridotta; non è possibile trasportare altre persone insieme a lei.

⚠ **AVVERTENZA:** Non tentare mai di salire o scendere dalla sedia a rotelle elettrica senza aver prima spento il joystick. In questo modo si eviterà che la Martinika Carbon Evo si muova in caso di contatto accidentale con il joystick.

⚠ **AVVERTENZA:** Non scendere né salire mai su una pendenza superiore a quella massima consigliata (10º).

⚠ **AVVERTENZA:** Non attraversare mai una pendenza, una rampa, ecc., in nessuna direzione.

⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare mai la sedia a rotelle elettrica senza che le ruote antiribaltamento siano state montate correttamente.

⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare la Martinika Carbon Evo su sabbia, terreni irregolari o superfici bagnate e/o scivolose.

⚠ **AVVERTENZA:** Questa sedia a rotelle elettrica non è progettata per essere utilizzata come sedile in un veicolo a motore. La Martinika Carbon Evo potrebbe non funzionare correttamente in caso di impatto con il veicolo, causando lesioni all'occupante della sedia a rotelle elettrica o ad altre persone.

⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare la sedia a rotelle elettrica se è danneggiata o non funziona correttamente.

⚠ **AVVERTENZA:** Prima di chinarsi o sporgersi in avanti, appoggiare sempre la schiena allo schienale della sedia e guardare in avanti, in direzione delle ruote.

⚠ **AVVERTENZA:** Non salire mai in piedi sul poggiapiedi, poiché la sedia a rotelle elettrica potrebbe ribaltarsi e causare lesioni all'utente.

⚠ **AVVERTENZA:** Posizionare sempre la sedia a

rotelle elettrica su una superficie stabile e piana prima di salire o scendere da essa.

⚠ **AVVERTENZA:** Le ruote antiribaltamento sono efficaci solo su superfici solide; su terreni morbidi come erba, neve o fango, possono affondare. Inoltre, una volta superata la pendenza massima, queste ruote potrebbero non impedire una caduta all'indietro.

4.3. USO PREVISTO

È progettata per essere utilizzata sia in ambienti interni che esterni e in spazi ristretti. Il suo scopo principale è garantire un trasporto confortevole all'utente. Tuttavia, è importante tenere presente che il peso e le dimensioni dell'utente non devono superare i 150 kg. Inoltre, questa sedia a rotelle non deve essere utilizzata da persone che presentino evidenti limitazioni fisiche o mentali che impediscano loro di maneggiarla in sicurezza.

4.4. CONTROINDICAZIONI

La Martinika Carbon Evo è progettata esclusivamente per il trasporto di persone adulte, ad esclusione di merci e bambini di età inferiore ai 16 anni. Inoltre, non deve essere utilizzata da persone che presentino limitazioni fisiche o mentali tali da comprometterne la capacità di guidarla in sicurezza nel traffico. Tali limitazioni possono includere emiplegia, paraplegia, disturbi mentali o disabilità visiva. È fondamentale tenere conto di queste controindicazioni per garantire la sicurezza dell'utente e di chi lo circonda.

4.5. OSSERVAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)

È importante tenere presente che le fonti di onde elettromagnetiche, come i telefoni cellulari, possono causare interferenze con la sedia elettrica. Allo stesso modo, i componenti elettronici interni della sedia elettrica potrebbero a loro volta influire sul funzionamento di altri dispositivi elettrici.

Per attenuare l'effetto di queste interferenze elettromagnetiche, è fondamentale attenersi alle seguenti avvertenze:

⚠ **AVVERTENZA:** La sedia elettrica può interferire con il funzionamento dei dispositivi vicini che emettono campi elettromagnetici.

⚠ **AVVERTENZA:** I campi elettromagnetici, come quelli generati dai generatori elettrici o da fonti ad alta potenza, possono influire sulle prestazioni di guida della Martinika.

⚠ **AVVERTENZA:** Si raccomanda di non utilizzare televisori o radio portatili in prossimità della sedia elettrica mentre questa è in funzione, per evitare interferenze.

⚠ **AVVERTENZA:** Prima di utilizzare la sedia a rotelle elettrica, verificare la presenza di antenne trasmittenti nella zona ed evitare di utilizzarla in loro prossimità per prevenire possibili interferenze.

⚠ **AVVERTENZA:** In caso di movimenti involontari o frenate improvvise, spegnere la sedia a rotelle elettrica non appena sia possibile farlo in sicurezza, per evitare situazioni pericolose.

4.6. POSSIBILI FONTI DI RADIAZIONE:

Tra le fonti più comuni di radiazioni figurano:

- Impianti portatili di ricezione e trasmissione, quali dispositivi dotati di antenne fisse montate direttamente sull'unità trasmittente.
- Cellulari o "walkie-talkie".
- Dispositivi portatili per la TV, la radio e la navigazione.
- Altri dispositivi personali di trasmissione.
- Dispositivi mobili di trasmissione e ricezione a medio raggio, come le antenne per auto con l'antenna montata all'esterno del veicolo.
- Sistemi fissi di trasmissione e ricezione.
- Dispositivi fissi e mobili di trasmissione e ricezione.
- Sistemi fissi di radio, TV e navigazione.
- Dispositivi trasmittenti e riceventi a lungo raggio.
- Torri radiofoniche e televisive.
- Apparecchi radio.

È importante tenere presente che altri apparecchi domestici, quali lettori CD, computer portatili, telefoni cordless, radio AM/FM, rasoi elettrici e asciugacapelli, generalmente non influiscono in alcun modo sulla sedia a rotelle elettrica, purché

funzionino correttamente e il loro cablaggio sia in buone condizioni. Tuttavia, si raccomanda di seguire le istruzioni per l'uso fornite con questi dispositivi elettrici per garantire un funzionamento senza problemi della sedia a rotelle elettrica.

4.7. RACCOMANDAZIONI:

Si raccomanda di evitare l'uso di dispositivi portatili, come le radio CB, o di accendere dispositivi di comunicazione personali, come i telefoni cellulari, mentre il veicolo a motore è in moto.

Prestare attenzione alle sorgenti di trasmissione nelle vicinanze, come le stazioni radio o televisive, e cercare di evitare di avvicinarsi ad esse per ridurre al minimo eventuali interferenze elettromagnetiche.

In caso di movimento involontario o di rilascio del freno, spegnere il veicolo a motore non appena sia possibile farlo in sicurezza.

Si tenga presente che l'aggiunta di accessori o componenti, o qualsiasi modifica apportata al veicolo a motore, può aumentarne la suscettibilità alle interferenze elettromagnetiche. È importante tenere conto di questo fattore quando si apportano modifiche alla sedia a rotelle elettrica.

5. FUNZIONAMENTO E RISCHI

5.1. PRIMA DI SEDERSI SULLA MARTINIKA CARBON EVO

- Prima di utilizzare la Martinika Carbon Evo, è fondamentale effettuare alcuni controlli per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento:
- Assicurarsi che l'interruttore del vano batteria sia in posizione "On".
- Verificare che le leve della ruota libera siano in posizione "Drive".
- Verificare che la batteria sia completamente carica.
- Assicurarsi di allacciare la cintura di sicurezza.
- Verificare che la sedia a rotelle elettrica sia completamente aperta e che i tubi del sedile siano correttamente posizionati nei supporti laterali.
- Assicurarsi che la leva del joystick sia disattivata per evitare movimenti accidentali in caso di contatto accidentale con il joystick.

5.2. INTRODUZIONE

- Assicurati di essere seduto in modo sicuro.
- Verificate che i poggiapiedi siano posizionati all'altezza giusta per i vostri piedi.

5.3. INDIRIZZO

- Utilizzare il joystick per guidare la sedia a rotelle elettrica. Si consiglia di impostare la velocità al livello più basso finché non si acquisisce esperienza e dimestichezza con il suo utilizzo.
- Quando si fa girare la sedia a rotelle elettrica, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente affinché le ruote non urtino contro alcun ostacolo.
- Presta particolare attenzione quando guidi in retromarcia.

5.4 GUIDA SU PENDENZE, SALITE E RAMPE

- Non salire né scendere pendenze che superino il limite raccomandato (10°).
- Quando si sale o si scende da una pendenza, procedere sempre in linea retta.
- Evitate di guidare su pendenze in qualsiasi direzione, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento della Martinika Carbon Evo e provocare lesioni gravi.
- Cercate di mantenere la sedia a rotelle elettrica in movimento quando salite o scendete una pendenza. Se dovete fermarvi, ripartite e accelerate lentamente e con cautela.
- Si tenga presente che lo spazio di frenata della sedia a rotelle elettrica può essere notevolmente maggiore in salita rispetto che in piano.

6. UTILIZZO E MONTAGGIO

6.1. PANNELLO DI CONTROLLO DEL MARTINIKA CARBON EVO

Pulsante ON/OFF: Premere una volta per accendere la sedia elettrica e un'altra volta per spegnerla.

Controller joystick: Controlla la direzione di movimento. Spingi in avanti per andare avanti, tira indietro per tornare indietro, a sinistra per girare a sinistra e a destra per girare a destra.

Indicatore di carica della batteria: Indica il livello di carica della batteria. Il verde indica che la batteria è completamente carica, l'ambra indica una carica media e il rosso indica che è necessario ricaricarla.

Indicatore di velocità: Visualizza la velocità impostata tramite i pulsanti di velocità bassa o alta.

Pulsante di velocità elevata: Premilo per aumentare la velocità.

Pulsante di velocità ridotta: Premilo per rallentare.

Pulsante del clacson: Attiva un segnale acustico di avvertimento per avvisare gli altri.

ATTENZIONE

È vietato scollegare l'alimentazione durante la guida, poiché ciò potrebbe causare l'arresto improvviso della Martinika Carbon Evo e il suo ribaltamento.

6.2. CHIUSURA E APERTURA

Aperto

Sollevare lo schienale fino a quando i perni a molla non si incastrano correttamente nella maniglia di spinta.





Con entrambe le mani, spingere verso il basso le traverse del sedile fino a quando la sedia a rotelle non sarà completamente aperta.



Piegato

Afferrare il rivestimento della seduta da entrambi i lati e tirare verso l'alto con entrambe le mani finché la sedia non sarà completamente ripiegata.



Afferrare i braccioli su entrambi i lati e spingerli verso l'interno contemporaneamente fino a ripiegare la sedia a rotelle.

Afferrare il manubrio e premere il pulsante di chiusura. Nel frattempo, sollevare leggermente il manubrio finché il perno a molla non si sgancia dal foro del manicotto del manubrio. Quindi, ripiegare il manubrio verso il basso.





6.3. TRASPORTO DELLA SEDIA

Rimuovere il cuscino e abbassare il rivestimento del sedile: Rimuovere il cuscino e abbassare il rivestimento del sedile mentre si ripiega la sedia a rotelle. Successivamente, lasciare visibili le cinghie della maniglia su entrambi i lati del sedile.

Sollevare la sedia a rotelle utilizzando le cinghie del maniglione: Quando è necessario trasportare la sedia a rotelle, è possibile sollevare facilmente l'intero prodotto utilizzando le cinghie della maniglia.





6.4. USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

Afferrare la fibbia della cintura di sicurezza e premere per sganciarla.





ATTENZIONE

Assicurarsi che non vi siano ostacoli intorno alla Martinika Carbon Evo prima di aprirla o ripiegarla.

Prima di aprire o ripiegare questo prodotto, presti attenzione alle dita e tenga la mano lontana dalle sue articolazioni meccaniche per evitare di schiacciarsi le mani.

Si prega di non sedersi né guidare questa sedia a rotelle elettrica quando è ripiegata o non completamente aperta.

Allineare la fibbia con l'inserto, premere verso il basso fino a sentire il "clic".

Si prega di allacciare la cintura di sicurezza quando ci si siede sulla Martinika Carbon Evo.

6.5. UTILIZZO DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DEL BRACCIOLO

Premere il pulsante rosso sul lato.

Il bracciolo può essere alzato o abbassato, facilitando così il trasferimento sulla Martinika Carbon Evo.





6.6. LE RUOTE ANTIRIBALTAMENTO

La sedia a rotelle è dotata di ruote antiribaltamento, che servono a impedire che la sedia si ribalti in caso di emergenza. Le ruote antiribaltamento di questa sedia a rotelle non possono essere smontate.





6.7. CONTROLLO DELLA BATTERIA

Attivazione e disattivazione della batteria: Utilizzare il pulsante di accensione per accendere o spegnere la batteria. Quando il pulsante **"ON"** Se il pulsante è premuto, la batteria è attivata. Per disattivarla, premere il pulsante **"OFF"**.





Sostituzione della batteria: Se la tua Martinika Carbon Evo è dotata di due batterie, utilizza il pulsante seguente per selezionare quella che desideri utilizzare. Premi il pulsante **"Io"** per attivare la batteria a sinistra e **"O"** per la batteria a destra.

Se è selezionato un lato in cui non è presente la batteria, la Martinika Carbon Evo non funzionerà.





6.8. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL JOYSTICK DI COMANDO

Per montare il joystick, collegare innanzitutto il cavo di collegamento, quindi inserirlo nel supporto del bracciolo e serrare la vite di fissaggio fino a quando non risulta correttamente fissato. Per smontarlo, seguire la procedura in ordine inverso.





6.9. UTILIZZO DEL RILASCIO DEL FRENO (RUOTA LIBERA)

Per attivare la modalità ruota libera, spingere la leva in avanti fino alla posizione **N**. In questa posizione, il freno viene rilasciato e la sedia può essere spinta manualmente. Per tornare alla modalità elettrica, spingere la leva verso di sé fino alla posizione **D**. Il freno rimane attivato e la sedia a rotelle può essere azionata tramite il joystick. Non sarà possibile spingere manualmente la sedia a rotelle.





Sbloccando i motori, la sedia può essere spinta manualmente, anche se le ruote potrebbero opporre una leggera resistenza a causa del sistema di freno elettrico.


6.10. UTILIZZO DEL POGGIAPIEDI

Per **estrarre i poggiapiedi**, premere il perno a sgancio rapido e tirarli verso l'esterno. Per rimetterli a posto, reinserirli e fissare il perno. Prima di utilizzare la sedia, verificare che siano ben saldi e stabili.





Per **regolare l'altezza del poggiapiedi**, allentare le viti e i dadi utilizzando una chiave fissa da 10 mm e una chiave a brugola da 5 mm. Successivamente, passare a un altro foro per regolare l'altezza desiderata.

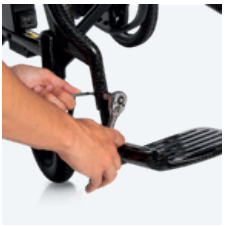



6.11. MONTAGGIO DELLA BATTERIA

Fissare le scatole della batteria su entrambi i lati della sedia a rotelle. Dietro ogni vano batteria sono presenti quattro scanalature e un cilindro da allineare con i fori e i perni del supporto della batteria. Quindi, spingerli verso il basso fino a sentire un "clic" e assicurarsi che i vani batteria siano ben fissati.





Prima di montare la batteria, assicurarsi di allineare il cilindro situato dietro l'alloggiamento della batteria con il foro presente nel supporto della batteria; in questo modo sarà possibile fissare facilmente la batteria in posizione.

6.12. SMONTAGGIO DELLA BATTERIA

Premere il pulsante situato sul vano batteria e sollevarlo per estrarre la batteria.

Quando sollevi la batteria, puoi rilasciare la mano con cui stai premendo il pulsante sul vano batteria.





ATTENZIONE

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "ON", ovvero che l'alimentazione sia collegata.

Tenere il vano batteria con entrambe le mani per evitare che cada durante il montaggio e lo smontaggio dello stesso.

7. BATTERIA E RICARICA

7.1. INFORMAZIONI GENERALI E ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO

- La sua sedia a rotelle elettrica richiede una batteria al litio sigillata e che non necessita di manutenzione. La batteria si ricarica tramite il sistema di ricarica esterno in dotazione.
- Caricare completamente la batteria della sedia a rotelle elettrica per almeno 10-12 ore prima di utilizzarla per la prima volta. La batteria nuova raggiungerà la sua piena capacità dopo aver effettuato circa 10-20 cicli di ricarica (periodo di rodaggio). Questo periodo di rodaggio è necessario affinché la batteria funzioni al massimo delle sue prestazioni e abbia una lunga durata.
- Mantenete la batteria completamente carica affinché la tua sedia a rotelle elettrica continui a funzionare senza problemi. Ricarica la batteria ogni giorno dopo ogni scarica, anche se parziale. A seconda del livello di scarica, potrebbero essere necessarie fino a 12 ore prima che la batteria sia nuovamente completamente carica.
- Se l'indicatore della batteria ha raggiunto il livello del LED rosso, ricaricare la batteria per almeno 16 ore, ignorando l'indicazione di carica completa!
- Anche se la sedia a rotelle elettrica non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la batteria deve essere ricaricata regolarmente per garantire che rimanga completamente carica.
- Non lasciare la batteria con un livello di carica basso senza ricaricarla completamente a intervalli regolari.
- Non ricaricare la batteria a temperature estreme. Si sconsiglia di ricaricare la batteria a temperature superiori a 40 °C (104 °F) o inferiori a 10 °C (50 °F).
- Protegga il caricabatterie da fonti di calore quali stufe e luce solare diretta. Se il caricabatterie si surriscalda, la corrente di carica diminuirà e il processo di ricarica subirà un ritardo.

7.2. RICARICA DELLE BATTERIE

- Assicurarsi di leggere e comprendere il manuale d'uso del caricabatterie, se in dotazione, nonché le avvertenze di sicurezza relative al caricabatterie.
- Scollegare l'alimentazione dalla sedia a rotelle elettrica.
- Decida quale presa di ricarica utilizzare; può scegliere tra due prese di ricarica:
  1. Presa della scatola delle batterie.
  2. Presa di alimentazione del controller.



Utilizzo: Il pulsante sul vano batterie deve essere in posizione **"ON"** durante la ricarica, ovvero quando il dispositivo è collegato alla corrente.





⚠ **AVVERTENZA:** Prima di avviare la ricarica, assicurarsi di accendere l'interruttore del vano batterie.

- Inserire la spina del caricabatterie nella presa di corrente.
- Non accendere il caricabatterie finché tutte le spine non sono inserite correttamente.
- Durante la ricarica, la spia LED del caricabatterie si accenderà di colore ambra.
- Una volta che le batterie saranno completamente cariche, la spia LED del caricabatterie diventerà verde.
- Scollegare l'alimentatore dal caricabatterie prima di rimuovere la spina dal caricabatterie.

⚠ **AVVERTENZA:** Evitare di posizionare la batteria vicino a fonti di calore, come un fuoco o una stufa.

⚠ **AVVERTENZA:** Se si utilizza un caricabatterie non adeguato, sussiste il rischio di esplosione e danneggiamento delle batterie. Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con il veicolo oppure un caricabatterie approvato da Hi-Fortune.

⚠ **AVVERTENZA:** Non tentare mai di aprire o smontare il caricabatterie. Se il caricabatterie non sembra funzionare correttamente, contattare il proprio rivenditore autorizzato.

⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare la batteria se emana odori, genera calore o presenta qualsiasi tipo di anomalia. Se la batteria è in uso o in ricarica, rimuoverla immediatamente dal dispositivo o dal caricabatterie e interromperne l'uso.

⚠ **AVVERTENZA:** Proteggere sempre il caricabatterie dall'acqua e ricaricarlo in un ambiente asciutto per evitare il rischio di scosse elettriche e danni.

⚠ **AVVERTENZA:** Non tentare di ricaricare le batterie collegando i cavi direttamente ai terminali delle batterie, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti e scosse elettriche.

⚠ **AVVERTENZA:** Utilizzi una prolunga solo se assolutamente necessario e si assicuri che sia in buone condizioni per evitare rischi di incendio e scosse elettriche.

⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare la sedia a rotelle elettrica mentre le batterie sono in carica, per evitare lesioni e danni.

⚠ **AVVERTENZA:** Per garantire una ricarica più efficace e sicura delle batterie della vostra sedia a rotelle elettrica, utilizzate esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione con il prodotto.

⚠ **AVVERTENZA:** Non tentare di rimuovere la batteria dall'alloggiamento né di reinserirla. In caso di problemi, contattare il proprio rivenditore autorizzato.

⚠ **AVVERTENZA:** Se il caricabatterie non è progettato per l'uso all'aperto, evitare di esporlo a condizioni climatiche avverse o estreme per prevenirne il danneggiamento.

⚠ **AVVERTENZA:** Non conservare né utilizzare la batteria in luoghi esposti a temperature elevate, poiché ciò potrebbe ridurne le prestazioni e accorciarne la durata. Evitare di lasciare la batteria in auto nelle giornate calde o in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

8. CONTROLLO E MANUTENZIONE

Protegga la sua sedia a rotelle elettrica facendola controllare regolarmente. Le consigliamo vivamente di far controllare la sua Martinika Carbon Evo almeno una volta all'anno dal suo ortopedico, che utilizzerà solo i ricambi originali. Questa ispezione periodica le garantirà che la sedia a rotelle elettrica funzioni perfettamente per anni. Ci sono molte cose che puoi fare da solo per mantenere la tua sedia a rotelle elettrica in condizioni ottimali. Controlla regolarmente la sedia e mantienila in condizioni ottimali.

8.1. PNEUMATICI E RUOTE

- Controllate periodicamente lo stato di usura degli pneumatici e sostituiteli quando necessario.
- Assicurarsi che le ruote possano ruotare liberamente senza urtare nulla. La ruota anteriore e la forcella devono muoversi liberamente per garantire una guida fluida.

8.2. QUADRO TRASVERSALE

- Verificare che il telaio trasversale della sedia a rotelle sia in buone condizioni. Assicurarsi che la sedia a rotelle sia facile da piegare e da aprire.

8.3. TAPPEZZERIA

- Controllare se il tessuto presenta fori, crepe o punti consumati.
- Verificare che i fori di fissaggio del rivestimento siano correttamente allineati e ben fissati.

8.4. PULIZIA

- Pulire regolarmente il rivestimento, il telaio, i componenti in plastica e le parti non elettriche della sedia a rotelle elettrica con un panno asciutto o umido.
- Non utilizzare acqua, olio o altre soluzioni chimiche per pulire la sedia a rotelle elettrica. Assicurarsi di non spruzzare acqua sulla sedia a rotelle elettrica, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.

8.5. CESSAZIONE DELL'UTILIZZO

Il simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici, in conformità con la legislazione e le normative locali. Al termine della vita utile della sedia a rotelle, portarla presso il centro di riciclaggio designato. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e garantiranno che venga riciclata nel rispetto dell'ambiente.

Il riciclaggio di ogni componente deve essere gestito da un'organizzazione di riciclaggio autorizzata, designata in conformità con le leggi e le normative locali. Per quanto riguarda i componenti in plastica, il telaio e le tubazioni, una volta esaurita la loro vita utile, possono essere consegnati a centri di riciclaggio professionali per lo smaltimento.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Può dedurre quale sia il guasto in base al numero di segnali acustici.

Di seguito è riportata una lista di controllo per l'auto-aiuto: provate innanzitutto a risolvere il problema seguendo i consigli riportati nella lista, quindi rivolgetevi al vostro ortopedico se il problema persiste.

Numero di segnali acustici	Possibile causa
2+1	Il problema del controller superiore o del controller inferiore
2+2	Il motore destro o il connettore presentano un cattivo contatto
2+3	Il freno destro o il connettore presentano un cattivo contatto
2+4	Il motore sinistro o il connettore presentano un cattivo contatto
2+5	Il freno sinistro o il connettore presentano un cattivo contatto
2+6	Sovracorrente
2+7	Joystick o cavo con contatto difetto
2+8	Decisione del controllore
2+9	Bassa tensione o guasto del controller

L'esempio di allarme fornito indica che se la sequenza sonora è composta da due bip rapidi seguiti da cinque bip lenti (2+5), ciò rappresenta un codice di allarme specifico. In questo caso, il guasto potrebbe essere causato da problemi al freno sinistro o da un cattivo contatto nel connettore.

9.1 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

Si consiglia di sostituire la batteria una volta all'anno. A tal fine, si consiglia di rivolgersi al concessionario o a un centro di assistenza autorizzato, dove potranno effettuare la sostituzione in modo adeguato, utilizzando batterie compatibili con il modello di sedia a rotelle elettrica.

9.2 SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI:

Si consiglia di sostituire gli pneumatici quando il battistrada è consumato per metà. A tal fine, si raccomanda di rivolgersi all'agenzia o al concessionario, che potranno fornire pneumatici adatti al modello di sedia a rotelle elettrica ed effettuare la sostituzione in modo professionale.

10. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da Lei acquistato è coperto dalla presente garanzia in caso di non conformità che si manifesti entro 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione nei primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto; a partire dal secondo anno e fino al terzo anno, il consumatore deve continuare a rivolgersi al venditore per ottenere la riparazione del difetto di conformità del bene, ma, se necessario, l'utente dovrà dimostrare che il prodotto presenta un difetto di fabbricazione e non è dovuto a un uso improprio o a una mancata manutenzione.

L'ambito di applicazione territoriale della presente Garanzia è l'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti di cui gode il consumatore ai sensi del Regio Decreto-legge n. 7/2021, del 27 aprile, recante il recepimento delle direttive dell'Unione Europea a tutela dei consumatori.

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA

Per poter far valere la Garanzia, il consumatore dovrà rivolgersi al punto vendita presso il quale ha acquistato il prodotto; qualora non fosse possibile contattare il punto vendita, sia perché ha chiuso, sia perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, potrà rivolgersi direttamente al produttore tramite l'indirizzo e-mail info@totalcare-europe.com.

Al momento del reclamo è indispensabile presentare una copia della fattura o dello scontrino, oppure una bolla di consegna successiva alla fattura o allo scontrino, in cui siano chiaramente indicati il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore dovrà restituire il prodotto presso lo stesso punto vendita in cui lo ha acquistato, allegando una nota esplicativa relativa alla non conformità.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE

- I danni causati da un uso improprio da parte dell'utente, derivante dal mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale, oppure causati da altri fattori umani, uso improprio, urto contro un oggetto…
- I danni causati da incidenti, abuso, negligenza o uso improprio.
- I danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi altro evento naturale.
- I prodotti che siano stati precedentemente riparati o modificati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se i componenti utilizzati non sono prodotti dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto privo di numero di serie o di fabbrica, oppure il cui numero sia stato alterato o cancellato.
- La garanzia non copre le parti soggette a usura.
- Le riparazioni o la sostituzione del componente difettoso saranno effettuate da personale qualificato e autorizzato da TotalCare Europe, S.L.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE PRESENTA SEGNI EVIDENTI DI DANNEGGIAMENTO O SE MANCANO DELLE PARTI.

SI RIVOLGA AL SUO FORNITORE.

martinika carbon evo



Legenda delle etichette.

Conformità europea.

Si prega di consultare le istruzioni per l'uso per informazioni sulla sicurezza.

Consultare il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Dati del produttore.

Data di produzione.

EC REP **Rappresentante europeo.**

LOT **Tutti quanti**

RIF. **Codice prodotto.**

SN **Numero di serie.**

MD **Dispositivo medico conforme al regolamento MDR.**



Video MiTaller

Scansiona il codice QR per accedere al video del manuale d'uso

Manuale d'uso

Sedia a rotelle elettrica pieghevole **Martinika Carbon Evo**

V1 · 14/09/2026